

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Naprava ELEGANTE za terapijo s pritiskom na nogo+ stegno



Uvoznik:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike



Naprava za pritisek na stopala in teleta Mirusens je preprosta naprava za izboljšanje cirkulacije in odpravljanje oteklin, ki se uporablja v domačem okolju ter v manjših rehabilitacijskih, fizioterapevtskih in wellness klinikah.

Prednosti:

Komplet Mirusens z dvema manšetama za noge spodbuja cirkulacijo in pretok limfe v spodnjih okončinah.

- odpravlja otekline različnega izvora,
- se bori s hudim sindromom nog,
- Idealno za preprečevanje krčnih žil,
- Podpira hujšanje in boj proti celulitu,
- odpravlja bolečine, ki so posledica tako imenovane "bolečine".




Kompresijska masaža (terapija s pritiskom) blagodejno vpliva na telo bolnika.

- olajša odtok venske krvi.
- stimulacija krvnega in limfnega sistema, kar poveča oskrbo organov s kisikom in hranilnimi snovmi.
- povečanje hitrosti odstranjevanja razgradnih produktov iz telesa, odprava kongestivnih simptomov, absorpcija edema.
- Zmanjša upornost krvi v arterijah in tako olajša delovanje srca.
- Dilatacija krvnih in limfnih žil ter s tem pospešitev krvnega obtoka.

Zaradi teh lastnosti je pnevmatska kompresijska masaža našla široko uporabo pri zdravljenju in rehabilitaciji. Presoterapija se lahko izvaja vsak dan. Posamezna terapija naj bi trajala približno 10-20 minut. Že po prvem tretmaju lahko začutite občutek lahkotnosti.

Tehnični podatki:

- Vhod: 220-240 V / 50-60 HZ
- Certificirano: CE ROHS FDA
- Območje masaže: stopalo+ tele
- 6 programov, 3 stopnje intenzivnosti, nizka in visoka temperatura.
- 3 gumbi za enostaven nadzor tega masažnega aparata z ročnim krmilnikom.
- Široka nastavljiva manšeta za noge, ki jo je mogoče enostavno prilagoditi
- Majhen krmilnik s številnimi programi.

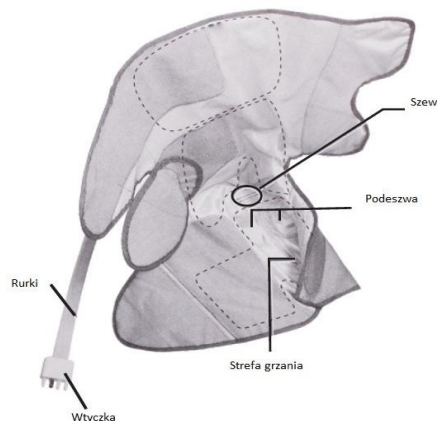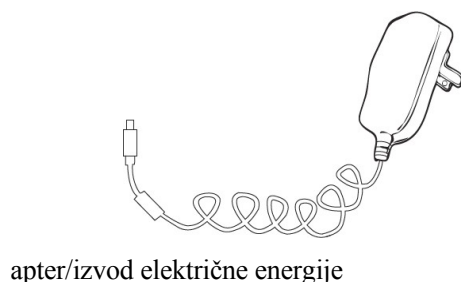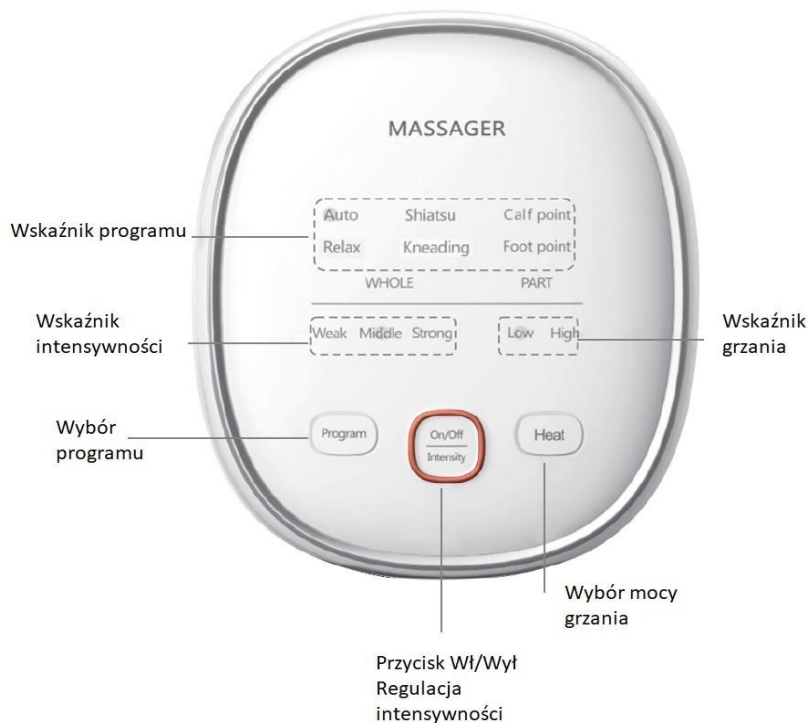



Pritisnite gumb, za vklop/izklop aparata(Ko je aparat vklopljen, bo samodejno nastavljen na ogrevanje na LOW in intenzivnost na WEAK
Ko ponovno pritisnete gumb, se prižge indikator za spreminjanje intenzivnosti: šibka, srednja, močna, izklopljena.

Ogrevanje se bo vklopilo po 5 sekundah. Nato lahko nastavite katero koli vrednost.
Gumb Program spreminja vrsto in položaj masaže: Auto, Relax, Shiatsu, Kneading, Leg point, Foot point.
Z gumbom Heat- program spremenite moč gretja - Low (šibko) High (močno).

Programi				Serije obdelave	
AUTO	Gnetenje	Shiatsu	Sprostite se	Komolec	Stopnja
Vključuje vse programi. Masaža uporablja stiskanje zraka.	gnetenje od od prsta do teleta. Uporablja stiskanje zraka.	Kompresijska masaža z uporaba stiskanje zraka	Nežna masaža z uporaba stiskanje zraka	Masaža telečjega dela z uporaba kompresijska masaža in gnetenje.	Masaža stopal z uporabo kompresijska masaža in gnetenje.

Pozor,

Izogibajte se neposrednemu stiku kože z izdelkom, bolje je, da ga uporabljate z visokimi nogavicami na začetku zdravljenja, udobno sedite in sprostite telečje mišice.


Navodila za uporabo

Dobro ovijte prste, gleženj in tele ter trdno prilepite velcro.

Priključite vtič na napravo

Velcro se lahko med zdravljenjem rahlo premika.

Čim debelejša je nogavica, tem šibkejši je občutek zdravljenja.

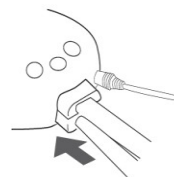

Masaža

Čas masaže: 10- 20 minut enkrat na dan (pretirana stimulacija mišic in živcev bo imela pri daljši uporabi nasprotni učinek)

Shranjeno:

1 Odstranite adapter iz kontakta, iz naprave in vtiča zračne cevi.

2 Pritrdite Velcro, kot je prikazano na sliki, in z rahlim upogibanjem vstavite zračni kanal.

Pozor,


Med vlečenjem vtiča ne potegnite močno za zračno cev.

Med skladiščenjem ne upogibajte kabla iz nadzorne plošče in napajalnika.

Ne prepogibajte zračnega in napajalnega kabla, ki se lahko zlomi. Naprave ne postavljajte na mesto, ki je dostopno otrokom.

Ne postavljajte ga na mesto z visoko temperaturo, visoko vlažnostjo ali neposredno sončno svetlobo. Na nadzorno ploščo ne polagajte nobenih predmetov in je na primer ne zavijajte v folijo (sicer lahko ostanejo sledi ali se spremeni barva).

Za čiščenje ne uporabljajte razredčil, hlapljivih olj ali alkohola (lahko povzroči poškodbe ali razbarvanje). Če naprave ne uporabljate, izklopite napajanje.


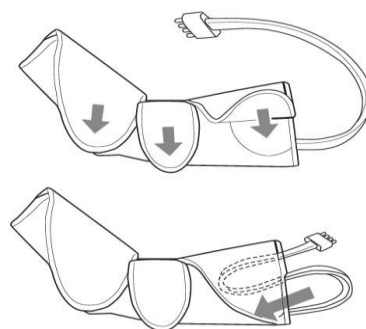


Ko je Velcro umazan, ga nežno očistite z zobotrebcecm itd. V zračni kanal ne vstavljajte nobenih predmetov.

Naprave ne smete uporabljati, če je telesna temperatura povišana, če je telo šibko ter med nosečnostjo in po porodu.



Velikost noge: približno 20 cm - 27,94 cm Velikost noge: približno 20 cm - 48 cm.

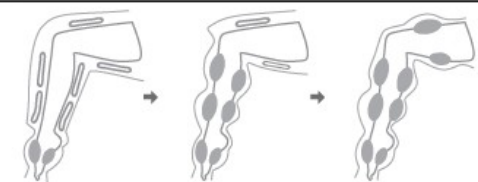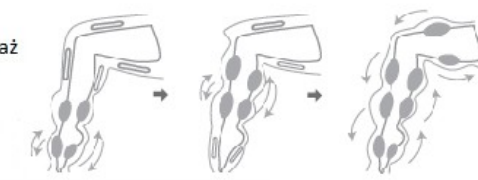	Program	Schemat masažu
Ogóle zmęczenie mięśni	Ugniatanie	Schemat działania masażu 
Rozluźnienie mięśni	Masaż	Mocny masaż 
Pierwsze użycie, Przed spaniem, po ćwiczeniach lub długim spacerze.	Relaks	Delikatny masaż 

POZOR!

Osebe, ki se zdravijo ali imajo naslednje simptome, se morajo pred uporabo naprave posvetovati z zdravnikom.

1. Na primer ljudje s srčnimi spodbujevalniki, ki so občutljivi na električne motnje.
2. Osebe z malignimi tumorji.
3. osebe z motnjami prekrvavitve nog in stopal.
4. Osebe z boleznimi srca.
5. Nosečnice in ženske po porodu
7. Osebe z okvaro čutil zaradi motenj perifernega krvnega obtoka, kot je sladkorna bolezen.
8. Osebe z osteoporozo.
9. Poškodovane osebe na območju masaže.
10. Ljudje s telesno temperaturo 38° C ali več (z vročino).
11. Pri bolnikih s trombozo, hudimi anevrizmami, akutnimi venskimi tumorji, različnimi kožnimi vnetji ali okužbami kože, vključno z vnetjem podkožnega tkiva, se lahko simptomi poslabšajo.

Pred uporabo preverite tkanino. * V nasprotnem primeru obstaja možnost poškodb, električnega udara ali temperaturnih opeklin pri nizki napetosti. *

Prepričajte se, da uporabljate napajanje AC 100~ 240V. Če se enota ne odziva ali čutite nelagodje med ga prenehate uporabljati, takoj izklopite napajanje. Preverite vtič napajalnika in se prepričajte, da je priključen. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara in električnega udara.

Ko uporabljate funkcijo ogrevanja, se naprave ne dotikajte dlje časa, sicer lahko pride do opeklin pri nizki temperaturi.

Pri naslednjih osebah se lahko po uporabi pojavi rdečica. Če rdečica po eni uri ne popusti, se posvetujte z zdravnikom.

Žic in kablov napajalnika ne obdelujte, pretirano upogibajte, vlečite ali zvijate. Nanj ne postavljajte težkih predmetov.

Opreme ni mogoče uporabljati v naslednjih primerih: * Vtič napajalnega ali zračnega voda je poškodovan.

* Vtič napajalnika je zrahljan. * Ko je vtič zračnega voda vstavljen v glavno enoto, je lahko ohlapen, kar lahko povzroči požar ali električni udar, požar ali okvaro zaradi kratkega stika....

Napajalnika iz vtičnice ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami. Nadzorujte čas masaže.

Ko izvlečete napajalnik, ne potegnite za kabel in izvlecite ohišje adapterja. Ne potegnite za zračno cev

ko odklopite zračno cev. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali požara. Med uporabo ne stojte ali hodite, sicer lahko pride do padca. Napravo uporabljajte v položaju, ki je za uporabnika udoben. V nasprotnem primeru lahko pride do motenj v delovanju ali električnega udara. Vtiča kabla ne vstavljajte ali odstranjujte iz masažne naprave z mokrimi rokami, sicer lahko pride do električnega udara.

Med masažo ne izvlecite napajalnika ali odklopite zračne cevi, sicer lahko pride do povzroči kratek stik. Pri shranjevanju ne ovijte napajalnega kabla okoli glavne enote ali zračne cevi okoli pasu.

Ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo, kot je kopalnica. Glavne enote ali traku ne izpostavljajte vodi, saj lahko pride do poškodb enote ali električnega udara. Ko odstranjujete napajalnik, ga odklopite, sicer lahko pride do električnega udara. Ko napajalnika ne uporabljate, ga odklopite, w
V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Delovanje naprave le s strani usposobljenega kozmetičnega osebja, se preprečijo neželeni učinki med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisler (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIV Tomasz Pacholczyk:
a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba električnega aparata ali stik z njim lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in hraniti zunaj dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih električnih in

Elektronske odpadke je treba zbirati ločeno in jih odnesti na zbirna mesta za elektronske in električne odpadke.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.