


Gebrauchsanleitung | Instruction leaflet | Instruction d'utilisation
Instrucciones de empleo | Istruzioni per l'uso | Gebruiksaanwijzing
Руководство по эксплуатации | Instrukcja użytkowania | Bruksanvisning | Käyttöohje



 HGP -1.7



PRED UPORABO

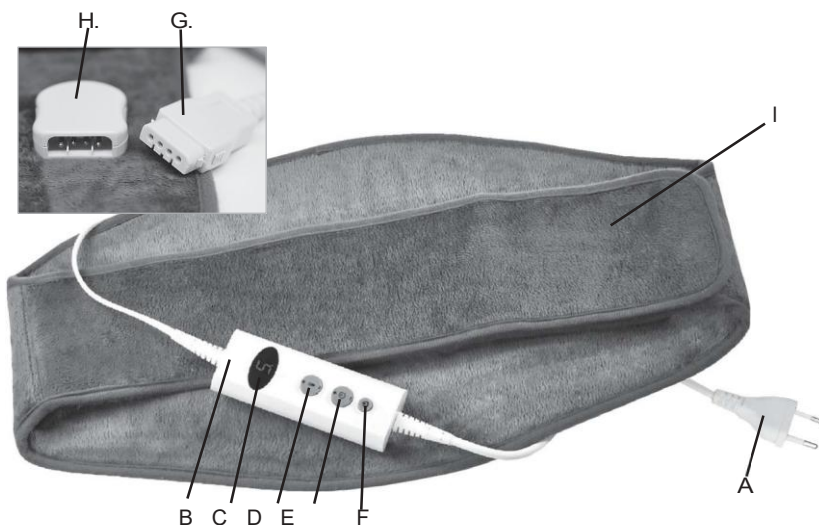

- A. Napajalni vtič
- B. Daljinec
- C. Prikazni zaslon
- D. Gumb za temperaturo
- E. Gumb za čas
- F. Gumb VKLOP/IZKLOP
- G. Vtič za daljinec
- H. Vtič za pas
- I. Pritrditveni trak

OPIS NAPRAVE

Shranite ta navodila!



Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo, preden napravo uporabite prvič.

Najlepša hvala za izbiro **grelnega pasu Promed HGP-1.7**. S tem prijetnim, **električnim grelnim pasom** boste lahko udobno pogreli svoje telo ali določene posamezne dele telesa. Zapenjanje z ježkom **Velcro®** omogoča, da **grelni pas** na telo pritrdite na še posebej preprost način in tako vedno zagotovite optimalno prilaganje. Uporaba tega **grelnega pasu** podpira **krvni obtok** in s tem sprostitve napetih mišičnih predelov ter povečuje splošno dobro počutje. Uživate v tej prijetni toploti v trenutkih sprostitve, kadar koli želite, na primer ko sedite ali ležite na kavču. **Naprava** je namenjena samo za **domačo uporabo** in ne za komercialne aplikacije ali uporabo v bolnišnicah ali medicinskih praksah.

Če želite izkoristiti vse prednosti svojega **grelnega pasu**, prosimo, temeljito preberite ta navodila in upoštevajte navodila za nego in varnost. To vam bo omogočilo, da boste v **grelnem pasu** uživali dlje časa. Prosimo, da ta navodila skrbno shranite za nadaljnjo uporabo ali če želite **grelni pas** predati drugi osebi. Mi, proizvajalec, ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli telesne poškodbe ali materialno škodo, ki so posledica neupoštevanja teh navodil.

Upamo, da boste uživali v svojem novem **Promed HGP-1.7**. Z informacijami spodaj vas želimo seznaniti z **napravo**.

SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT INSTRUCTIONS.

OBDRŽI ZA PRIHODNOST UPORABA.

OPIS NAPRAVE

Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo, preden napravo uporabite prvič.

Najlepša hvala za izbiro **grelnega pasu Promed HGP-1.7**. S tem prijetnim, **električnim grelnim pasom** boste lahko udobno pogreli svoje telo ali določene posamezne dele telesa. Zapečanje z ježkom **Velcro®** omogoča, da **grelni pas** na telo pritrdite na še posebej preprost način in tako vedno zagotovite optimalno prilaganje. Uporaba tega **grelnega pasu** podpira **krvni obtok** in s tem sprostitve napetih mišičnih predelov ter povečuje splošno dobro počutje. Uživajte v tej prijetni toploti v trenutkih sprostitve, kadar koli želite, na primer ko sedite ali ležite na kavču. **Naprava** je namenjena samo za **domačo uporabo** in ne za komercialne aplikacije ali uporabo v bolnišnicah ali medicinskih praksah.

Če želite izkoristiti vse prednosti svojega **grelnega pasu**, prosimo, temeljito preberite ta navodila in upoštevajte navodila za nego in varnost. To vam bo omogočilo, da boste v **grelnem pasu** uživali dlje časa.

Prosimo, da ta navodila skrbno shranite za nadaljnjo uporabo ali če želite **grelni pas** predati drugi osebi. Mi, proizvajalec, ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli telesne poškodbe ali materialno škodo, ki so posledica neupoštevanja teh navodil.

Upamo, da boste uživali v svojem novem **Promed HGP-1.7**. Z informacijami spodaj vas želimo seznaniti z **napravo**.

PRED UPORABO

SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

Prosimo, upoštevajte naslednje vidike pred kakršnim koli zagonom:

- **Grelni pas** se sme uporabljati samo s priloženim **krmilnikom GL05**.
- Napajalna napetost **grelnega pasu**: 220 - 240 V AC.
- Če se pojavijo kakršne koli težave z **grelnim pasom**, ga pošljite proizvajalcu.
- Samo za **uporabo v zaprtih prostorih**.
- Pri uporabi **električne naprave** v bližini otrok je potreben skrben nadzor.
- **NEVARNOST!**
- **Naprave** nikoli ne prinašajte v neposreden stik z vodo ali drugimi tekočinami.
- **Naprave** nikoli ne uporabljajte v kadi, tušu, bazenih, savnah ali na prostem.
- **Naprave** se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- **Naprave** se ne sme uporabljati na prostem.
- Ta **naprava** uporablja napajalno napetost; zato veljajo enaki varnostni predpisi kot za vse druge **električne naprave**.
- Pred kakršnim koli zagonom **naprave** preverite, ali so vse komponente **naprave** v popolnem stanju.
- V primeru napake ali okvare takoj izklopite **napravo** in izvlecite **napajalni vtič** iz napajalnega sistema.
- Vsa popravila lahko opravi samo proizvajalec. **Naprave** nikoli ne odpirajte.
- Posamezni deli te **naprave** se ne smejo razstavljati, popravljati ali spreminjati.
- **Napravo** uporabljajte samo v suhih prostorih in če je vaše telo suho.
- **Naprave** nikoli ne uporabljajte v bližini drugih virov toplote.
- **Naprave** nikoli ne nosite oz. vlecite tako, da jo držite za **napajalni kabel**.
- Kabel izvlecite iz **napajalne vtičnice** z **vtičem** in nikoli z vlečenjem kabla.
- **Napajalnega kabla** ne vlecite čez ostre robove ali ga stiskajte, ne pustite, da visi navzdol, in ga ne postavljajte ali obešajte čez vroče predmete (npr. kuhalne plošče) ali odprt plamen ter ga zaščitite pred

vročino ali oljem.

- Podaljševalni kabel uporabljajte samo, če ste se predhodno prepričali, da je v popolnem stanju.
- Če je **napajalni kabel naprave** poškodovan, naj ga nemudoma zamenja strokovnjak.
- **Naprave** nikoli ne uporabljajte, če je bil **napajalni kabel** poškodovan, če je **naprava** padla ali prišla v stik z vodo.
- Izvlecite **napajalni vtič** iz **napajalne vtičnice**, če **naprava** ni v uporabi.
- **Naprave** ne smejo uporabljati dojenčki in majhni otroci (0-3 leta).
- To **napravo** lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z omejenimi telesnimi, senzoričnimi oz. intelektualnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzoruje odgovorna oseba za njihovo varnost ali če so od te osebe prejeli izčrpna navodila o tem, kako **napravo** uporabljati na način, da razumejo povezana tveganja.
- Otroci se z **napravo** ne smejo igrati.
- Čiščenje in vzdrževalnih del ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- **Električna naprava** ni igrača. Otroci ne poznajo tveganj, ki lahko nastanejo pri uporabi **električnih naprav**. Zato to **napravo** uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok.
- Pred čiščenjem **napravo** izključite iz sistema **napajanja**.
- Med čiščenjem poskrbite, da nobena tekočina ne pride v stik s **stikalom** in da se **naprava** uporablja le v popolnoma suhem stanju.
- V **napravo** ne vstavljajte nobenih igel ali koničastih predmetov.

OPOZORILO!

PREBERITE TA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

- **Naprave** nikoli ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki niso usposobljene za njeno uporabo.
- **Napravo** uporabljajte samo za namene, opisane v teh navodilih za uporabo.
- Otrokom nikoli ne dovolite, da se igrajo z embalažnim materialom, saj obstaja tveganje zadušitve.
- **Naprave** ne postavljajte ali uporabljajte na vročih površinah ali poleg odprtega plamena, da preprečite taljenje ohišja.
- **Naprave** ne shranjujte v bližini umivalnika ali kadi, saj obstaja tveganje, da bi padla ali bila potegnjena v umivalnik ali kad.
- Prosimo, da se pred uporabo **naprave** posvetujete z zdravnikom, če imate zdravstvene težave, kot so krčne žile, tromboza itd..
- **Naprave** nikoli ne uporabljajte na odprtih ranah, opeklinah, hematomih, oteklinah ali podobnih poškodbah.
- Takoj prenehajte z uporabo **naprave**, če se počutite neprijetno.
- Osebe, občutljive na toploto, bi morale to **napravo** uporabljati posebej previdno in samo za kratka obdobja uporabe.
- Jakost magnetnega polja: maks. 80 A/m; Gostota magnetnega pretoka: maks. 0,1 mT.
- **Naprave** nikoli ne uporabljajte na živalih.

POZOR!

- Da bi zagotovili pravilno delovanje **krmilnega elementa**, ga ne postavljajte na **napravo** ali pod njo.
- **Grelnega pasu** nikoli ne uporabljajte, medtem ko je prepognjen, zmečkan ali stisnjen skupaj.
- **Naprave** ne smejo uporabljati majhni otroci, mlajši od treh let, razen če je nastavitve prednastavil starš ali zakoniti skrbnik ali če je bil otrok ustrezno usposobljen in poučen o tem, kako **napravo** upravljati.
- **Naprave** ne uporabljajte, kadar je mokra.
- **Naprave** ne smejo uporabljati neemočni in nezaščiteni ljudje ali ljudje, neobčutljivi na toploto.
- Otroci, mlajši od treh let, ne smejo uporabljati **naprave** zaradi svoje nezmožnosti, da bi se odzvali na pregrevanje.
- Elektronski sestavni deli v **stikalu** se lahko segrejejo, ko se **grelni pas** uporablja. Zato **stikalo** med delovanjem ne sme biti pokrito ali ležati na **grelnem pasu**.

- Za shranjevanje **naprave** jo pustite, da se ohladi, preden jo zložite.
- Prepričajte se, da se **grelni pas** ne guba in da nanj niso postavljeni nobeni predmeti.

UPORABA NAPRAVE

UPORABA NAPRAVE

Opis delov (glej sliko):

- **Grelni pas (A)**
- **Napajalni vtič (B)**
- **Krmilnik (C)**
- **Zaslon/Gumb za temperaturo (D)**
- **Gumb za časovnik (E)**
- **Gumb VKLOP/IZKLOP (F)**
- **Vtič krmilnika (G)**
- **Vtič grelnega pasu (H)**
- **Pritrdilni trak (I)**

Preden začnete, preverite, ali je dobava popolna.

- Prepričajte se, da se **grelni pas** ne zatakne.
- Uporabljajte samo originalne dele!
- Prosimo, ne uporabljajte nobenega drugega **krmilnika!**

Pozor!

- Prosimo, poskrbite, da **grelni pas** ni preveč tesen, da lahko med uporabo med njim in vašo kožo kroži zrak.
- V vseh okoliščinah preprečite kopičenje toplote.

Upravljanje:

- Za vklop **grelnega pasu** pritisnite **gumb VKLOP/IZKLOP (F)**.
 - Za nastavitve želeno temperature pritisnite **gumb za temperaturo (D)**. Želena temperaturo lahko nastavite na **10 nivojih** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H).
 - Za zvišanje temperature pritisnite **"+"** v zgornji polovici **gumba za temperaturo (D)**.
 - Za znižanje temperature pritisnite **"-"** v spodnji polovici **gumba za temperaturo (D)**.
 - Za nastavitve želenega časa delovanja pritisnite **gumb za časovnik (E)**. Želeni čas delovanja lahko nastavite na **9 nivojih** (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
 - Vsak nivo ustreza času delovanja približno **10 minut**.
 - Za podaljšanje časa delovanja pritisnite **"+"** v zgornji polovici **gumba za časovnik (E)**.
 - Za skrajšanje časa delovanja pritisnite **"-"** v spodnji polovici **gumba za časovnik (E)**.
 - Ko je čas delovanja nastavljen, se na zaslonu prikaže izbrana raven temperature.
 - **Grelni pas** je programiran tako, da je ob vklopu **naprave** prednastavljena privzeta nastavitve časa delovanja **40 minut** in temperaturna stopnja **4**.
 - **Grelni pas** se samodejno izklopi, ko preteče izbrani čas delovanja.
 - Za ponovni zagon **grelnega pasu** po izteku izbranega časa delovanja preprosto pritisnite **gumb VKLOP/IZKLOP (F)**.
 - Za neprekinjeno delovanje **grelnega pasu** je priporočljiva uporaba temperaturnih nivojev **1 - 4**.
- Prosimo, upoštevajte:**
- Če **grelni pas** in **krmilnik** nista ali nista pravilno povezana, se na zaslonu prikaže črka **"E"**.

- Ta prikaz se prikaže tudi, če sta **krmilnik** ali **grelne žice grelnega pasu** okvarjeni.
Samodejni izklop
- **Električni grelni pas** se samodejno izklopi, ko preteče izbrani čas delovanja. To prihrani energijo in dodatno zagotavlja, da **grelni pas** ne deluje brez nadzora.
- Po uporabi izvlecite **napajalni vtič** iz **napajalne vtičnice**.

TEŽAVE

Težava	Vzrok	Odpravljanje težav
Naprava se ne segreva.	Naprava ni vklopljena.	Vstavite napajalni vtič v napajalno vtičnico in vklopite napravo .
	Naprava ni priključena na napajalni sistem.	Vstavite napajalni vtič v napajalno vtičnico in vklopite napravo .
	Naprava je okvarjena.	Pošljite napravo proizvajalcu.
Na zaslonu krmilnika se prikaže črka "E".	Grelni pas in krmilnik nista ali nista pravilno povezana.	Povežite vtič krmilnika (G) z vtičem grelnega pasu (H) .
	Naprava je okvarjena.	Pošljite napravo proizvajalcu.

NEGA NAPRAVE

- Grelni pas se lahko opere ročno ali v pralnem stroju pri 40 °C z uporabo blagega detergenta.
- Grelnega pasu ne likajte.
- Prosimo, ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo klor.
- Grelnega pasu ne čistite s kemičnim čiščenjem.
- Grelnega pasu ni mogoče sušiti v sušilnem stroju.
- Ne uporabljajte visokotlačnih čistilcev.
- Prepričajte se, da krmilnik ne pride v stik z nobeno tekočino. Tekočine lahko povzročijo škodo.
- Grelnega pasu nikoli ne uporabljajte, dokler je moker ali vlažen.
- Grelni pas ne sme biti vklopljen, medtem ko se suši. Pustite, da se grelni pas posuši na zraku. Ne uporabljajte nobenih pripomočkov (npr. ščipalk za perilo) za obešanje, da se posuši. To lahko poškoduje kable v notranjosti

Shranjevanje in redni pregled

- **Grelnega pasu** ne mečkajte. Izdelek previdno zložite za shranjevanje.

- **Napravo** shranjujte na suhem mestu, kadar ni v uporabi.
- Pustite, da se **naprava** ohladi, preden jo zložite ali zvijete.
- **Napravo** pogosto pregledujte glede znakov obrabe ali poškodb. Če so takšni znaki prisotni, če je bila **naprava** napačno uporabljena ali ne deluje, jo vrnite dobavitelju, preden jo ponovno vklopite.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev proti moljem.
- Med shranjevanjem na **napravo** ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko to poškoduje električno ožičenje.
- V primeru okvare ali napake pošljite **napravo** proizvajalcu.

Odstranjevanje

- Električno orodje, dodatke in embalažo je treba reciklirati na okolju primeren način.
- **Samo za države EU:** Električnega orodja ne odlagajte med gospodinske odpadke! V skladu z **Evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opre**mi ter z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba nedelujoče električno orodje zbirati ločeno in reciklirati na okolju prijazen način.
- Ta simbol kaže, da odlaganje tega izdelka v gospodinske odpadke ni dovoljeno znotraj EU. Odpadne naprave vsebujejo dragocen recikliran material, ki ga je treba reciklirati. Recikliranje preprečuje tudi nenadzorovano odlaganje odpadkov, ki škoduje okolju in zdravju ljudi. Zato prosimo, da vse odpadne naprave oddate v ustrezne sisteme za zbiranje ali jih pošljete na mesto nakupa za odlaganje. **Naprava** bo nato reciklirana.

GARANCIJA

Ta izdelek je bil izdelan z izjemno skrbnostjo in temeljito preizkušen, preden je zapustil tovarno. Zato za ta izdelek nudimo garancijsko dobo **24 mesecev** od datuma nakupa. Izdelki **Promed** ustrezajo svojemu opisu in ustreznim specifikacijam; vaša odgovornost je zagotoviti, da je izdelek, ki ste ga kupili, zasnovan za vaš namen uporabe.

Garancija ne krije:

- Normalne obrabe izdelka.
- Napak, ki so nastale med prevozom ali shranjevanjem izdelka.
- Napak ali poškodb, ki so nastale zaradi neustrezne uporabe ali neprimerne vzdrževanja.
- Škode, ki je posledica neupoštevanja navodil v priročniku za uporabo.
- Škode, ki je posledica sprememb izdelka, ki jih ni izvedel **Promed**.
- Škode, ki jo povzročijo ostri predmeti ali je posledica zvijanja, stiskanja, padca, nenormalnega udarca ali drugih dejanj, ki presegajo razumni nadzor **Promeda**.
- Deli, ki so podvrženi obrabi (npr. gibljivi deli, kot so kroglični ležaji itd., pritrdilni elementi itd.), so na splošno izključeni iz garancije.

Zahtevek v okviru garancije ni izvršljiv, če:

- Izdelek ni poslan nazaj v originalni ali ustrezno varni embalaži.
- Je izdelek spremenila ali popravila oseba ali podjetje, ki ni **Promed** ali eden od pooblaščenih trgovcev **Promeda**.
- Je bil izdelek popravljen z uporabo delov, ki jih ni odobril **Promed**.
- Je bila serijska številka / LOT številka izdelka odstranjena, izbrisana, spremenjena ali postala nečitljiva.

Iz higienskih razlogov morajo biti vsi izdelki, ki so bili izpostavljeni neposrednemu stiku s telesom ali telesnimi tekočinami (npr. kri), pred pošiljanjem nazaj pakirani v dodatno plastično vrečko. V tem primeru je treba to posebej navesti na embalaži ali v priloženih dokumentih.

Za komponente ali izdelke, ki so zamenjani v garancijskem obdobju, je garancija zagotovljena samo za preostanek prvotne garancijske dobe, pod pogojem, da je zamenjavo izdelka ali dela izvedel **Promed** ali eden od

GARANCIJA

pooblaščenih trgovcev **Promeda**. Garancijsko obdobje se začne na dan nakupa. Zahtevke v okviru te garancije je treba uveljavljati znotraj garancijskega obdobja. Pritožbe, nastale po izteku garancijske dobe, se ne morejo upoštevati. V skladu s temi garancijskimi pogoji bo garancija veljavna le, če je datum nakupa mogoče dokazati s prodajnim računom ali podobnim dokumentom.

Pridržujemo si pravico do tehničnih in vizualnih sprememb ter sprememb značilnosti. Ta garancija je veljavna in izvršljiva samo v državi, v kateri jo je kupil prvotni kupec, pod pogojem, da je bil namen **Promeda**, da se ta izdelek ponuja za prodajo v tej državi. Ta garancija je izvršljiva tudi v kateri koli državi znotraj Evropskega gospodarskega območja, v kateri ima **Promed** pooblaščenega uvoznika ali prodajnega partnerja. Odvisno od posamezne države, so lahko veljavne posebne in različne garancije in jamstva v skladu z veljavno zakonodajo. Te pravne določbe niso izključene ali omejene s temi garancijskimi pogoji. Kolikor je dovoljeno v skladu z nacionalno zakonodajo, se garancijsko obdobje ne podaljša, obnovi ali kako drugače spremeni s kakršno koli poznejšo nadaljnjo prodajo, popravilom ali zamenjavo izdelka. Določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga se ne uporabljajo. Naši garancijski pogoji ne vplivajo na zakonsko garancijsko obveznost prodajalca. **Promed** ne odgovarja za morebitne napake v prevodu.

Naslednje informacije so bistvene za nemoteno obdelavo:

- Originalno dokazilo o nakupu/prejemu ali žig trgovca z datumom nakupa.
- Odkrita napaka.
- Oznaka izdelka / tip / serijska/LOT številka.