

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Večnamenski kombinirani stroj 27in1 Redline




Uvoznik: ACTIVESHOP
Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev.A/11/2024



SPREDNJI PANEL	3
STRANSKI PANEL	4
KAVITACIJSKI PILING	4
INSULTS	4
KONTRAINDIKACIJE	5
KORAK PO KORAKU	5
METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA	5
ULTRADIZMI	7
INSULTS	7
KONTRAINDIKACIJE	7
METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA	7
GALVANIZACIJA	8
KORAK PO KORAKU	9
DARSONWAL	9
KORAK PO KORAKU	10
METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA	10
MIKRODERMABRAZIJA	10
PREDNOSTI DIAMANTNE MIKRODERMABRAZIJE	10
INSULTS	10
KONTRAINDIKACIJE	10
KORAK PO KORAKU	11
METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA	11
HOT/COLD HEAD	12
HLADNA GLAVA	12
OGREVALNA GLAVA	12
MEZOTERAPIJA BREZ IGEL	13
INSULTS	13
KONTRAINDIKACIJE	13
ZAJAMČENI UČINKI PO VEČ TRETMAJIH	13
NAVODILA ZA UPORABO	14
NEGA OBRAZA	14
KORAK PO KORAKU	14
IZVAJANJE TRETMAJA ZA TELO	14
KORAK PO KORAKU	15
ELEKTROKOAGULACIJA	16
VAKUUM	16
INSULTS	16
SPRAY	16
SVETILKE WOODA	17
WAPOZON	17
TEŽAVE IN NJIHOVE REŠITVE	17
SEZNAM DODATNE OPREME	18
 VARNOSTNI UKREPI	 40


SPREDNJI PANEL

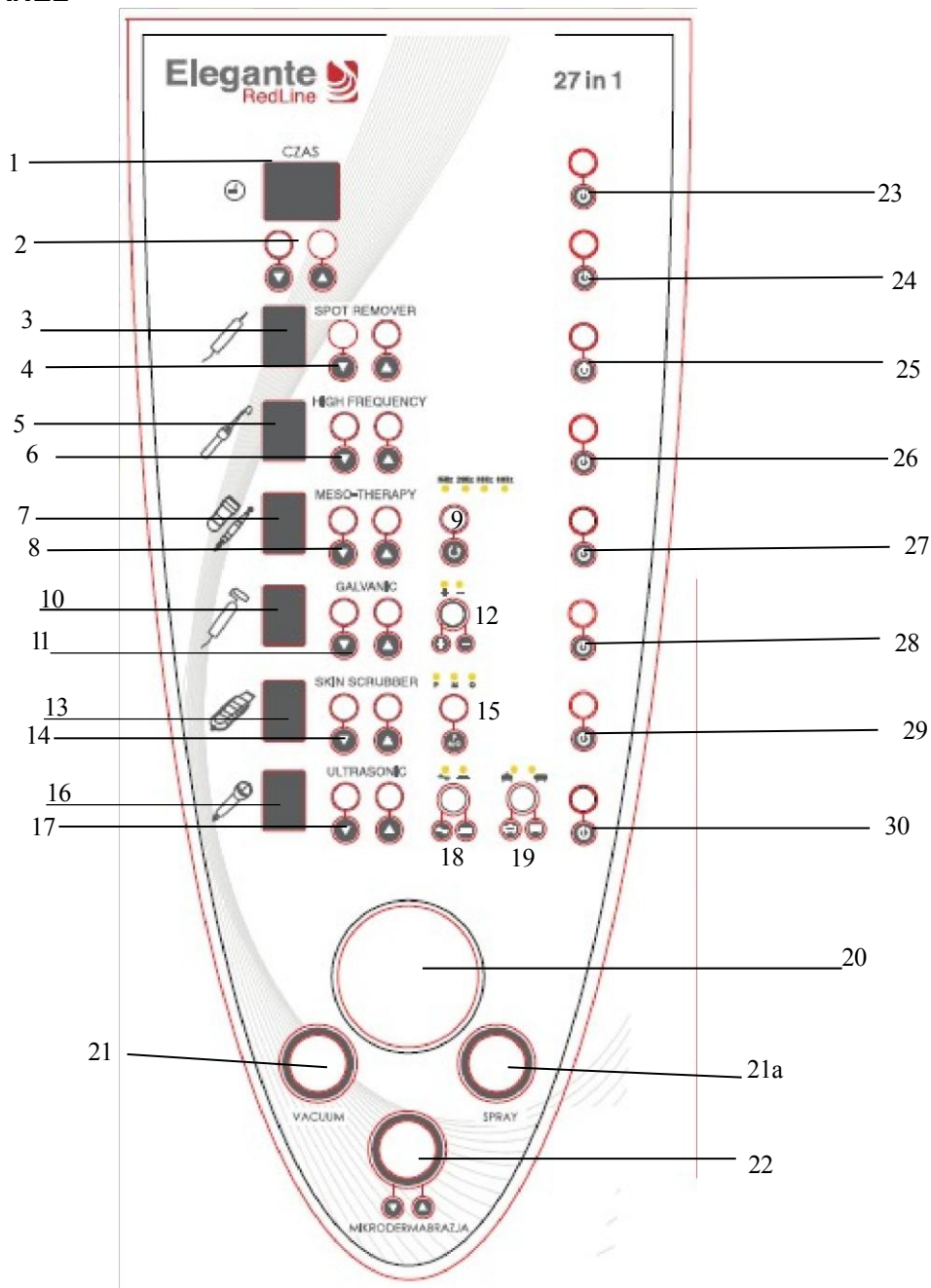

1. Prikaz časa,
2. Časovna prilagoditev,
3. Prikaz intenzivnosti,
4. Nadzor intenzivnosti,
5. Prikaz intenzivnosti,
6. Nadzor intenzivnosti,
7. Prikaz intenzivnosti,
8. Nadzor intenzivnosti,
9. Nadzor frekvence,
10. Prikaz intenzivnosti,
11. Nadzor intenzivnosti,
12. Možnost izbire prevleke + ali -,
13. Prikaz intenzivnosti,
14. Nadzor intenzivnosti,
15. Izbira možnosti zdravljenja,
16. Prikaz intenzivnosti,
17. Nadzor intenzivnosti,
18. Izbira vala zdravljenja,

19. Izbira glave za zdravljenje,
20. Vakuumski merilnik,
21. Vhod za mikrodermabrazijo, vakuum, pršilo 21a
22. Nadzor tlaka
23. -30 Vkllop/izklop posameznih plošč.

STRANSKI PANEL

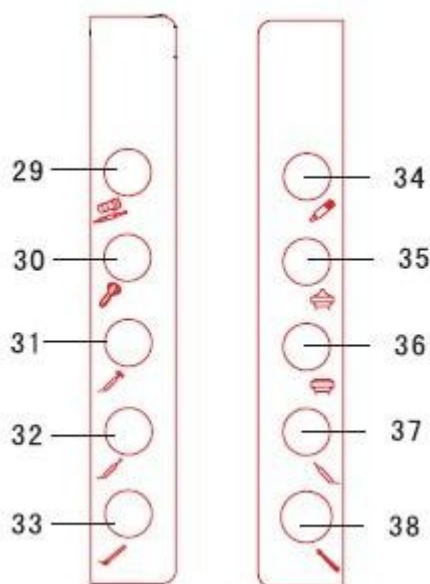

29. Vstop iz mezoterapije,
30. Vhod iz vroče-hladne glave,
31. Vhod iz galvanizacije - rolon,
32. Vhod iz galvanske krogle,
33. Pasivna elektroda,
34. Vstop iz kavitacijskega luščenja,
35. Vhod iz glave v ultrazvok,
36. Vhod iz ultrazvočne glave, 37. Vhod iz elektrokoagulacije,
38. prispevek Darsonwala.

KAVITACIJSKI PILING

Kavitacijski piling je v bistvu neboleče čiščenje kože z ultrazvočnimi vibracijami. Omogoča temeljito odstranjevanje odvečnega sebuma iz por in lasnih mešičkov ter odstranjevanje ogrcev. Kavitacijski piling je obogaten z mikromasažo, ki izboljša cirkulacijo in oksigenacijo tkiv, zaradi česar se poveča prodor aktivnih snovi.

Pri uporabi pilinga pride do pojava kavitacije, ko pride ultrazvok v stik s tekočino, nastanejo mikroskopski plinski mehurčki in vrsta procesov kemikalije, ki razgrajujejo odmrle celice rožene plasti.

INSULTS

- Dvig obraznega ovala in brade,
- učvrstitev strukture kože,
- Glajenje površinskih gub,
- Zmanjšanje vrečk pod očmi in kurjih očesnih oces,
- Kolagenska rekonstrukcija,
- Terapija proti staranju - profilaksa - zmanjšanje nečistoč, razširjenih por
- učvrstitev strukture kože.

KONTRAINDIKACIJE

Nosečnost,
Porušena kontinuiteta kože,
Glivične, bakterijske, virusne spremembe,
Bolezni živčnega sistema,
Duševne bolezni, epilepsija,
Rak (med zdravljenjem in po njem),
Okužbe,
Del kože, pod katerim je kovina (npr. žica v kosti po zlomu), plastika, silikon (npr. silikonski vsadki v dojkah),
Deli kože, na katerih so nameščeni medicinski in elektronski instrumenti, kot so slušni aparati, srčni spodbujevalniki, umetno srce itd,
Otroci, mlajši od 12 let,
Deli kože s kovinskimi elementi v telesu (npr. prebadanje trebuha), visok tlak,
Sladkorna bolezen,
Bolezni srca.

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z gumbom 15 izberite vrsto obdelave,
Z gumbom 14 izberite intenzivnost,


- Pritisnite gumb 29, da začnete zdravljenje.

Priprava kože na zdravljenje:

Pred tretmajem kožo temeljito očistite in odstranite ostanke ličil. Po končanem tretmaju lahko kožo tonizirate, po možnosti z blagim tonikom.


METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA

Na obrazu, navlaženem s tonikom, opravite kavitacijski piling (način P), čas tretmaja 10-15 minut. Lopatice držite pod kotom 45 stopinj (slika 1).

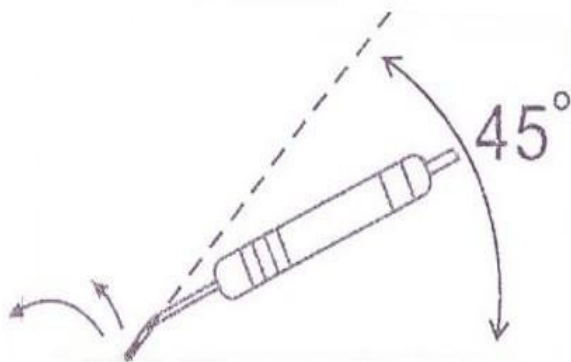


Slika 1
Primeren kot lopatice za kavitacijski piling



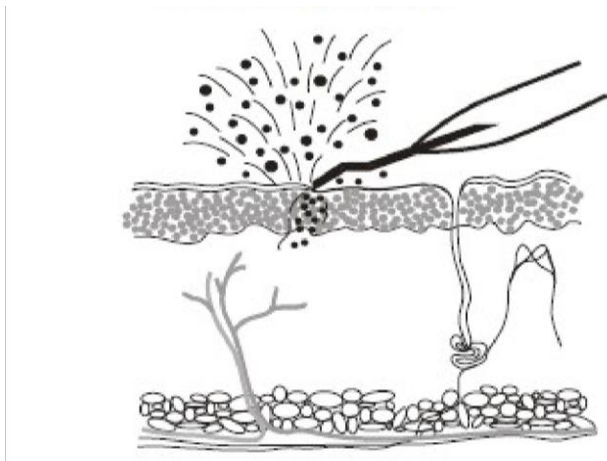


Možnost zdravljenja P


Nato nanesite eno od predlaganih ampul SYIS in **hladilni** gel na obraz in obdelava s sonoforezo

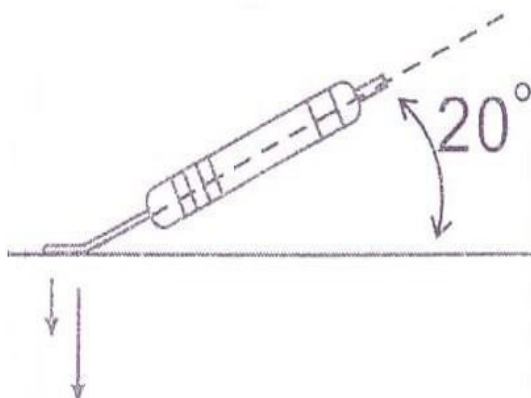

- Pritisnite gumb (9), da izberete želeni način zdravljenja,
- Pritisnite gumb START (7), da začnete zdravljenje.

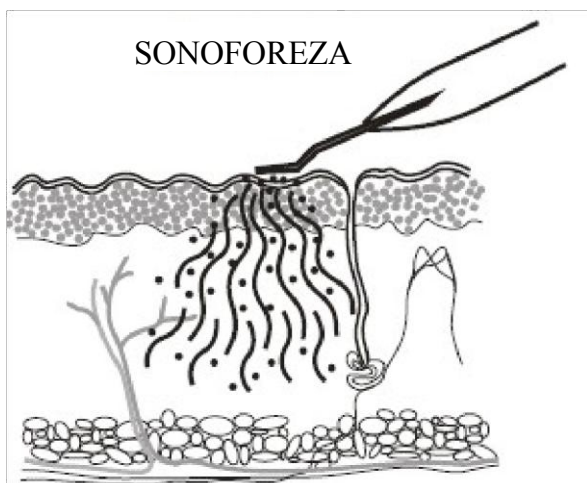

Možnost zdravljenja M

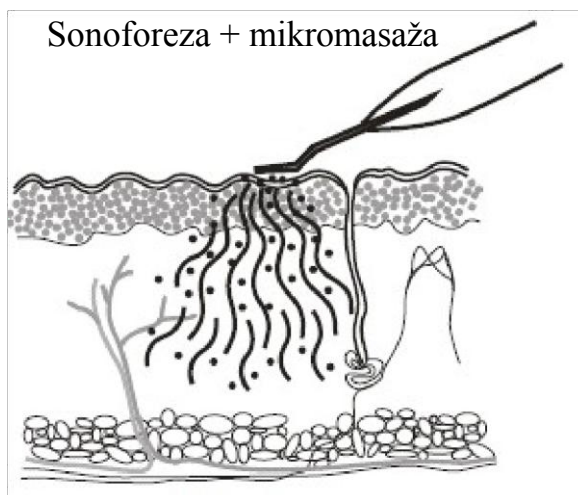

Možnost zdravljenja O

RAZSTRANJEVANJE

Lopatko za lupljenje razkužimo s kozmetično blazinico, močno navlaženo z razkužilom za roke AHD.

ULTRADIZMI

To je sistem za prenos aktivnih snovi globoko v kožo. Naprava uporablja fizikalni pojav, ki se pod vplivom ultrazvoka pojavi v celičnih membranah, zaradi česar učinek enega tretmaja v koži traja do 72 ur. Tretma je popolnoma neboleč, med njim pa lahko stranka občuti nežne vibracije, ki prihajajo iz glave.

INDIKACIJE

Lifting obraznega ovala in brade, učvrstitev strukture kože,
Glajenje površinskih gub,
Zmanjšanje vrečk pod očmi in kurjih očesnih oces,
rekonstrukcija kolagena,
Terapija proti staranju - preprečevanje,
zmanjšanje nečistoč, razširjenih por, učvrstitev strukture kože.

KONTRAINDIKACIJE

Nosečnost,
Porušena kontinuiteta kože,
Glivične, bakterijske, virusne spremembe,
bolezni živčnega sistema,
Duševne bolezni, epilepsija,
Rak (med zdravljenjem in po njem),
Okužbe,
Del kože, pod katerim je kovina (npr. žica v kosti po zlomu), plastika, silikon (npr. silikonski vsadki v dojkah),
Deli kože, na katerih so nameščeni medicinski in elektronski instrumenti, kot so slušni aparati, srčni spodbujevalniki, umetno srce itd,
Otroci, mlajši od 12 let,
Deli kože s kovinskimi elementi v telesu (npr. prebadanje trebuha), visok tlak,
Sladkorna bolezen,
Bolezni srca.

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z gumbom 18 izberite vrsto obdelave,
Izberite tip glave z gumbom 19 Izberite intenzivnost z gumbom 17,
Pritisnite gumb 30, da začnete zdravljenje.
Pred zdravljenjem temeljito očistite kožo

METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA


Ultrazvočni gel se nanese **na** obraz.

Na tako pripravljeno kožo se nanese ena od izbranih ultrazvočnih glav. Trajanje tretmaja: 15-20 minut za obraz, 15-30 minut za telo.

Predlagani ultrazvočni gibi glave za obraz:



Predlagani gibi ultrazvočne glave na telesu:

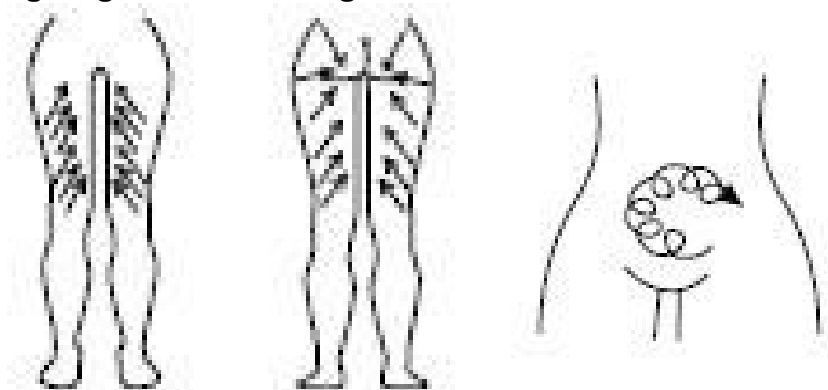

ODSTRANJEVANJE

Ultrazvočno glavo razkužimo z bombažno blazinico, močno navlaženo z razkužilom za roke AHD.

GALVANIZACIJA

Pri galvanizaciji se uporabljajo terapevtske lastnosti ene od elektrod (anodna ali katodna elektroda). Pri zdravljenju z iontoforezo se elektroliti, ki se nahajajo v zdravilih, vnesejo globoko v kožo. Pri zdravljenju z enosmernim električnim tokom se uporabljajo **elektrode**.

INDIKACIJE

razdraženo kožo,
razširjene žile (telangiektazije), rozacea,
razširjene pore,
omrzline, vaskularna
nevropatija,
nevralgija.

KONTRAINDIKACIJE

gnojna in vnetna stanja kože in mehkih tkiv,
vročinska stanja,
predhodna uporaba mazil, zdravilnih krem po 28 dneh, duševna
bolezen,
Spastična paraliza,
senzorične motnje,
prekinjena kontinuiteta
kože, motnje srca,
bolezni notranjih organov,
revmatične bolezni,
dermatološke bolezni,
bolezni živčnega sistema,
nosečnost,
tumorji,

kovinski deli v telesu, aktivna
pljučna tuberkuloza.

OPOMBA!!!

Pred začetkom zdravljenja je treba izključiti kontraindikacije, Oseba,
ki se zdravi, mora odstraniti ves nakit,
Intenzivnost izberemo glede na strankine občutke.

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z
gumbom 12 izberite vrsto obdelave,
Z gumbom 11 izberite intenzivnost,
Pritisnite gumb 28, da začnete zdravljenje.

Pred zdravljenjem kožo temeljito umijte in očistite.

METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA

Za galvanizacijo obraza uporabimo gazo, močno navlaženo z vodo, za iontoforezo pa pred nanosom gaze uporabimo ustrezno ampulo, ki je sposobna ionske disociacije. Na obdelano kožo hkrati naneseemo **dve glavi za** zdravljenje, da se zapre cirkulacija. Čas tretmaja 15 minut za obraz, 30 minut za telo.

RAZSTRANJEVANJE

Elektrode razkužite z bombažno blazinico, močno navlaženo z razkužilom za roke AHD.

DARSONWAL

D'Arsonvalovi tokovi so ena od različic visokofrekvenčnih tokov. Njihovo biološko delovanje temelji na neposrednem ustvarjanju minimalne količine toplote v tkivih. Naprava ustvarja ozon s pomočjo elektrostatičnih razelektritev, ki se pojavljajo v kroglicah. Pri zdravljenju z darsonizacijo se uporabljajo tokovi s frekvencami med 300 in 500 kHz.

Delovanje d'Arsonvalovih tokov temelji predvsem na učinku na krvne žile in vegetativnih živčnih končičev. Iskrenje med elektrodo in kožo povzroči vazodilatacijo krvnih žil, kar vpliva na podkožno tkivo. Nastali ozon deluje razkuževalno.

INDIKACIJE:

- Kožne senzorične motnje,
- Alopecija areata,
- Stimulacija krvnega obtoka,
- Razkuževanje kože,
- Pruritus,
- Frostbite,
- Zdravljenje nevralgije

KONTRAINDIKACIJE:

- Nosečnost
- Hipertenzija
- Otekline
- Živčna hiperaktivnost
- Bolezni srca
- Vnetna stanja kože
- Vročina

- Astma
- Epilepsija
- Kovinski vsadki
- Akne rozacea
- Razširjene krvne žile
- Alergijska stanja kože

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z gumbom 6 izberite intenzivnost.

Pred zdravljenjem je treba kožo temeljito umiti in očistiti.

METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA

Pred izvajanjem postopka temeljito osušite območje obdelave.

Izbrano peloto razkužimo s salicilnim alkoholom in začnemo zdravljenje.

Intenzivnost toka je individualno prilagojena stranki.

Čas zdravljenja 5-7 minut.

Ko preteče zeleni čas, izklopite kaseto z gumbom POWER.

MIKRODERMABRAZIJA

To je postopek, pri katerem se z abrazivnimi diamantnimi konicami in sesalno močjo odluščijo površinske plasti povrhnjice.

Mikrodermabrazija je učinkovito sredstvo za zmanjšanje drobnih gubic, kurjih oces, hiperpigmentacije in brazgotin po aknah. Spodbuja izgradnjo kožnih celic in kolagena. Je zelo priljubljen neinvazivni kozmetični tretma. Ob redni uporabi daje odlične rezultate pri vseh vrstah kože. Rezultati so opazni takoj.

PREDNOSTI DIAMANTNE MIKRODERMABRAZIJE

varna, nadzorovana globina abrazije, alternativa za tiste,

ki ne prenašajo kemičnega pilinga,

povečanje stopnje absorpcije uporabljenih aktivnih sestavin, spodbujanje

mikrocirkulacije,

Krepitev obrambne sposobnosti kože - Spodbujanje proizvodnje kolagena in elastina v koži (obnova dermisa).

INSULTS

Brazgotine po aknah, ogrci,

bele ogrce, razširjene pore,

hrapava, mozoljasta koža, mlahava

koža,

pomlajevanje kože ter odpravljanje drobnih linij in gubic okoli oči, ust in vratu ter strij,

izsušitev kože,

hiperpigmentacija in

razbarvanje,

poškodbe kože (obraz, roke, vrat) zaradi sonca,

perifolikularna keratoza,

Akne vulgaris (komedonske, papularne), seboreja.

KONTRAINDIKACIJE

Virusne okužbe, bakterijske

okužbe, glivične okužbe,

pustulozne in gnojne akne, rozacea,

kožo vek,
prekinjena kontinuiteta kože, kožni
tumorji in znamenja, kavernozi
angiomi,
Zdravljenje aken z zdravilom Roaccutan (priporočljiv je vsaj 3-mesečni premor), dovzetnost za
keloide (brazgotinjenje),
kirurgija obraza (priporočljiv je vsaj dvomesečni premor).

Pri menstruaciji ni kontraindikacij,
zagorela koža,
nosečnost pri zdravljenju obraza.

POGOSTOST ZDRAVLJENJA:

serijo 5-10 tretmajev,
terapija proti aknam - razmik med tretmaji 3 tedne, terapija proti
gubam - razmik med tretmaji 10-15 dni

SIMPTOMI, KI SE LAHKO POJAVIJO PO ZDRAVLJENJU:

eritem, ki vztraja 24-48 ur po zdravljenju, občutek
mravljinčenja, srbenje,
preobčutljivost kože.

NEGA KOŽE DOMA

izogibanje sončenju približno en teden po zdravljenju,
izogibanje plavanju v klorirani vodi (bazenih) do 72 ur po zdravljenju.
Uporabljajte dnevne kreme z visokim zaščitnim faktorjem pred soncem, vsaj 30.


KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vklopite enoto na glavno napajanje, rdečo
cev vstavite v vhod 21
Pritisnite gumb 23, da začnete zdravljenje, s
kolescem prilagodite intenzivnost (22).

Pred zdravljenjem kožo temeljito umijte in očistite.

METODOLOGIJA ZDRAVLJENJA

Priključite šobo in glavo za mikrodermabrazijo:

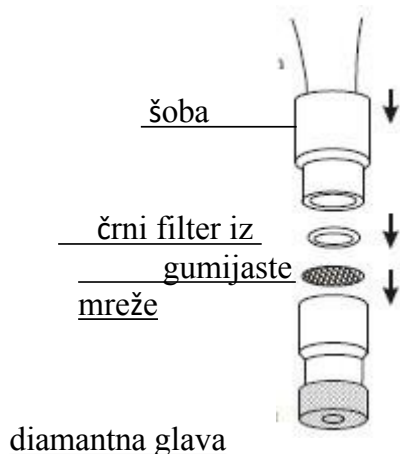



- Šoba z glavo za mikrodermabrazijo,

Zdravilo 20-25 minut nanašajte na očiščeno in popolnoma osušeno kožo obraza.

HOT/COLD HEAD

Vroče-hladna glava se hkrati segreje na 40 °C in ohladi na 10 °C.

HLADNA GLAVA

Pomirja razdraženost in rdečico na koži. Glavo lahko uporabite po ročnem čiščenju, mikrodermabraziji in kislinski negi za pomiritev rdečice.

VROČA GLAVA

Pred zdravljenjem se uporabi topla glava, da se razširijo krvne žile. Uporablja se lahko tudi kot alternativa vapozonu - na maski opravimo masažo odpravljanje stresa.

Uporaba izmeničnih toplih in hladnih glav kot žilne telovadbe za tesnjenje in krepitev krvnih žil.

KORAK PO KORAKU


Enoto vključite v glavno napajanje z gumbom O/I, Enoto vključite z gumbom za zagon/pauzo na glavi, Če se grelna glava segreje, se prižge rdeča lučka delovanja.

Pred začetkom zdravljenja si temeljito umijte in očistite obraz. Nato nanesite gel s hialuronsko kislino.

Delovna svetilka hladne glave

Delovna svetilka vroče glave

Glava za zagon/pauzo

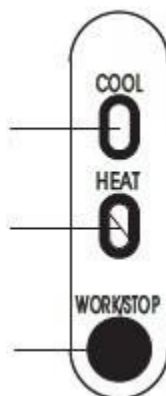

MEZOTERAPIJA BREZ IGEL

Mezoterapija brez igel je sodobna in neinvazivna metoda, ki omogoča prenos aktivnih snovi globoko v dermis:

električnega polja z uporabo pojava elektroporacije, ultrazvočnih valov.

Elektroporacija je proces, ki poteka v celični membrani pod vplivom visokonapetostnih električnih polj. Pod vplivom električnega polja pride do reverzibilnih sprememb (začasne destabilizacije) v strukturi celične membrane (zlasti njenih lipidnih komponent), pri čemer se nastanejo pore.

To je varen postopek, saj ne poškoduje celičnih membran in vbizgava snovi v ampulah. Kombinirano delovanje elektroporacije in ultrazvoka poveča količino, globino enakomernost vnosa aktivnih snovi v kožo. Ta metoda zagotavlja hitre in vidne rezultate pri zmanjševanju gub in linij, npr. na z o l a b i a l n i h gub, "kurjih očesc", pri lifting tretmajih, izboljšanju barve in strukture kože. Tretma se izvaja v seriji 4-6 tretmajev v presledkih 5-10 dni.

Mezoterapija brez igel pri proticelulitni terapiji in terapiji maščobnega tkiva.

Mezoterapija učinkuje na maščobno tkivo zaradi možnosti uravnavanja moči pulza. Z izbiro ustreznega seruma, ampule ali koktajla glede na težavo dosežemo zmanjšanje maščobnega tkiva, strij in proticelulitne učinke. Tretma izvajamo v seriji 10-12 tretmajev, 2-3-krat tedensko, zato je učinek tretmaja d o l g o t r a j n e j š i . Celulit se zmanjša, koža postane bolj čvrsta in napeta. Zmanjšanje količine maščobe dosežemo s prodiranjem snovi v maščobne celice.

INSULTS

- izguba elastičnosti kože,
- preprečevanje nastanka gub,
- celulit (stegna, trebuh, zadnjica, roke),
- strije,
- hipertrofične brazgotine.

KONTRAINDIKACIJE:

- nosečnost,
- kovinskih elementov v telesu,
- bolezni srca,
- srčni spodbujevalnik,
- bolezen ven,
- epilepsijo,
- preobčutljivost kože, vnetje.

ZAJAMČENI UČINKI PO VEČ TRETMAJIH:

- jasno vidni rezultati liftinga,
- zmanjšanje gub in brazd,
- izboljšanje tona in teksture kože.

NAVODILA ZA NEGO OBRAZA

Obravnava obraza se izvaja z glavo v obliki peresa. Pred zdravljenjem je treba izključiti kontraindikacije za stranko in osebo, ki izvaja zdravljenje. Med izvajanjem zdravljenja izvajalec ustvari tako imenovani "zaprti krog", zato je treba roko ali prst položiti na strankin obraz.



KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z gumbom 8 izberite intenzivnost, Izberite vrsto Hz z 9 Pritisnite gumb 27, da začnete zdravljenje.

PARAMETRE JE TREBA PRILAGODITI ZAZNAVANJU STRANKE.

Izbira parametrov:

Intenzivnost: 1-9 Frekvenca: 15-20 Hz


OPOMBA!!!

Sprememba frekvence se pojavi, ko se intenzivnost poveča na 9, če stranka še vedno ne čuti kratkih električnih impulzov.

Pred spremembo frekvence zmanjšajte intenzivnost na 1. Čas zdravljenja 5-10 min.

Pred tretmajem si temeljito umijte in očistite obraz. Uporabite lahko tudi hladilni gel.

Gibi z glavo se izvajajo v obliki črke O ali Z.

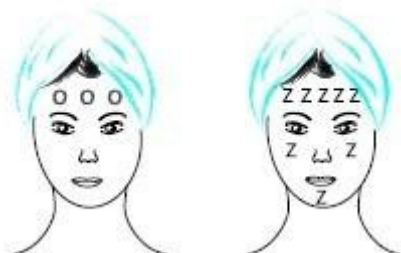

Po mezoterapiji opravimo ultrazvok, da snovi v ampulah potisnemo globoko v kožo.

IZVAJANJE TRETMAJA ZA TELO

Tretma za telo se izvaja z glavo, v katero se vstavi ampula, serum ali koktajl. Pred zdravljenjem je treba izključiti kontraindikacije za zdravljenje telesa.



Uporaba seruma, ampule, koktajla na glavi za zdravljenje:



KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite napravo na glavno napajanje, z gumbom 8 izberite intenzivnost, Izberite vrsto Hz z 9 Pritisnite gumb 27, da začnete zdravljenje.

PARAMETRE JE TREBA PRILAGODITI ZAZNAVANJU STRANKE.

Izbira parametrov:

Intenzivnost: 5-9 Frekvenca: 30-60 Hz


OPOMBA!!!

Sprememba frekvenca se pojavi, ko se intenzivnost poveča na 9, če stranka še vedno ne čuti kratkih električnih impulzov.


Pred spremembo frekvence zmanjšajte intenzivnost na 1. Čas zdravljenja 20-30 min.

Gibi z glavo so drsni ali v obliki črke O.

Trebuh:

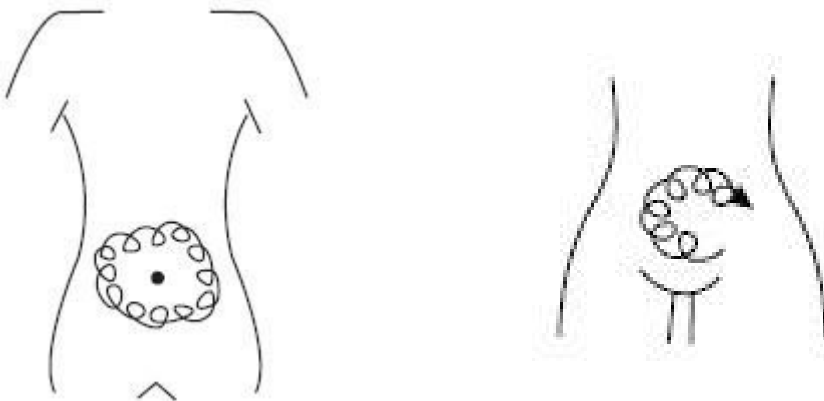

Spodnje okončine:

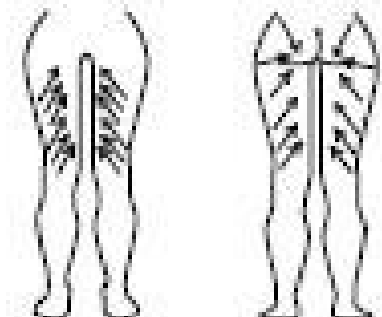

Po mezoterapiji opravimo ultrazvok, da snovi v ampulah potisnemo globoko v kožo.

ELEKTROKOAGULACIJA

Ta metoda vključuje rezanje beljakovin z električnim lokom. Uporablja se pri zdravljenju fibromov in bradavic.

Pred začetkom postopka je treba pravilno diagnosticirati poškodbo kože, nato pa jo razkužiti. Z iglo, ki jo držimo pod pravim kotom, odstranimo spremembo.

OPOMBA: Intenzivnost se izbere glede na strankine občutke. Občutki na zdravi koži so zelo boleči.

Kontraindikacije:

Diabetes
Motnje krvnega obtoka,
motnje koagulacije.

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite enoto na glavno napajanje, z gumbom 4 izberite intenzivnost, Pritisnite gumb 25, da začnete zdravljenje.

VAKUUM

Pri tem postopku se uporabljajo sesalna moč in stekleni mehurčki, ki so ustrezno izbrani za območje obdelave. Tretma se izvaja na suhi koži po poteku mišic.

INDIKACIJE:

ogrci, razširjene
pore,
hrapava, mozoljasta koža, mlahava
koža,
strije,
suhost kože

KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite enoto na glavno napajanje,
Vstavite rdečo cevko v vhod 21- izberite ustrezen mehurček, pritisnite gumb 23, da začnete zdravljenje,
S kolescem prilagodite intenzivnost.

SPRAY

Uporablja se za nežno tonizacijo kože s pomočjo vakuumu in vsebovanega posoda za tonik.

Priključek za cev



KORAK PO KORAKU

Z gumbom O/I vključite enoto na glavno napajanje,

Črno cev vstavite v vhod 21a,
Pritisnite gumb 23, da začnete zdravljenje,
s kolescem prilagodite intenzivnost.

LESENE SVETILKE

Kvarčna svetilka z dolžino sevanja 366 nanometrov.

Ta svetilka je sestavljena iz štirih fluorescenčnih cevi, ki ultravijolične žarke oddajajo skozi stekleni filter.
Na podlagi pojava fluorescence lahko postavimo diagnozo.

Za vsako točko na koži je značilen drugačen odsev:

normalna koža - modrovijolična,

suha koža - blede rožnata,

dobro navlažena temno vijolična koža,

mastna koža skoraj črne barve.

Lesena svetilka se pred uporabo segreva približno 3 minute,

Razdalja med stranko in svetilko je približno 20 cm.

WAPOZON

To je naprava za uparjanje obraza, vratu, ramen, dekolteja in hrbta ter drugih delov telesa.

Topla voda in para zaradi svojih sposobnosti širjenja por tudi mehčata odmrle kožne celice in pomagata očistiti polt.

OPOMBA!!!

V wapozon nalijte le prekuhano vodo ali vodo neposredno iz pipe. Tehnični podatki:

Napajanje AC 220V,
frekvenca 50-60Hz, moč
850 W,
Dimenzije 104 x 61,5 x 43
cm Teža 36 kg,
Sesalna moč 63 cmHg,
kavitacijski piling 25-28 kHz

1MHz ultrazvok,

TEŽAVE IN NJIHOVE REŠITVE

PROBLEM	REŠITEV
Napajanje je vklopljeno, vendar se naprava ne odziva	1. Preverite, ali je glavni del naprave pravilno priključen na vir napajanja. 2. Preverite, ali je gumb za vklop vklopljen.
Slabo sesanje ali odsesavanje sploh ni	1. Preverite, ali je kabel pravilno priključen na napajanje. 2. Preverite, ali je filter očiščen.

Glavna enota se med delovanjem pregreva	1. Če je bila naprava predolgo v uporabi, izklopite napajanje in počakajte, da se naprava se bo sam ohladil. 2. Preverite, ali je napetost pravilna (to naj preveri električar).
Ni napajanja	Preverite varovalko. Če je izrabljena, jo zamenjajte.

SEZNAM DODATNE OPREME

IME	ENOTA	KOLIČINA
Osnova naprave,	Število kosov.	1
Glave za mikrodermabrazijo,	Kosov.	9
Ultrazvočna glava za nego obraza,	Szt	1
Ultrazvočna glava za zdravljenje okolice oči,	Szt	1
Kača,	Szt	1
Lopatka za kavitacijsko luščenje,	Kosov.	1
Toplo-hladna glava	Szt	1
Elektrokoagulacijska glava	Szt	1
Glava za mezoterapijo	Szt	2
Darsonwal	Szt	1
Peleti iz darsonwala	Szt	3
Galvanizacija	Szt	1
Napajalni kabel,	Kosov.	1
Varovalke,	Kosov.	2
Navodila,	Kpl.	1
Jamstvo.	Kpl.	1

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo upravlja usposobljeno kozmetično osebje, kar preprečuje neželene učinke med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeno v teh navodilih za uporabo. Vse servisne posege in popravila mora opraviti servisna služba družbe ACTIVESHOP Ltd.
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Odstranite vtič iz vtičnice in se obrnite na servisno službo družbe ACTIV v naslednjih primerih:
 - a. v aparat je vdrla tekočina,
 - b. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - c. je napajalni kabel poškodovan,
 - d. če se je naprava prevrnila ali če je njeno ohišje poškodovano.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pade tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari ali celo zažge.

Pozornost:

V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak se obrnite na servisno službo družbe **ACTIVESHOP Ltd.**

Ta oprema ni namenjena za uporabo osebam (otrokom) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj ali znanja o opremi, razen pod nadzorom ali v skladu z navodili za uporabo opreme.

VARSTVO OKOLJA

Naprava je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali predelati, in jo je treba vrniti **družbi ACTIVESHOP Ltd.**