

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Hidravlični podiatrični stol Azzurro 713A



Uvoznik:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike




Dimenzije stola:

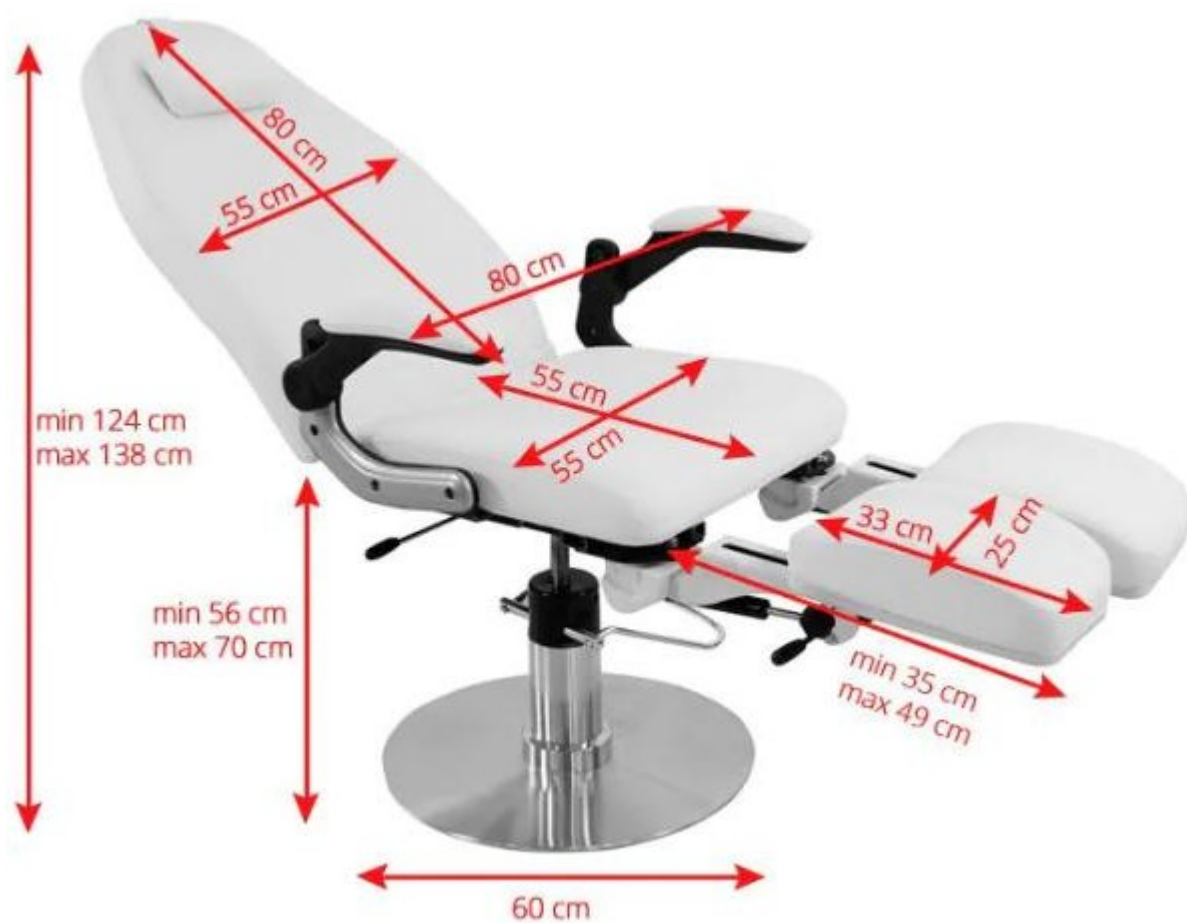


Montaža:


1. Dvignite ročico pogona do najvišjega položaja in nato namestite sedež na steblo pogona, kot je prikazano na sliki.

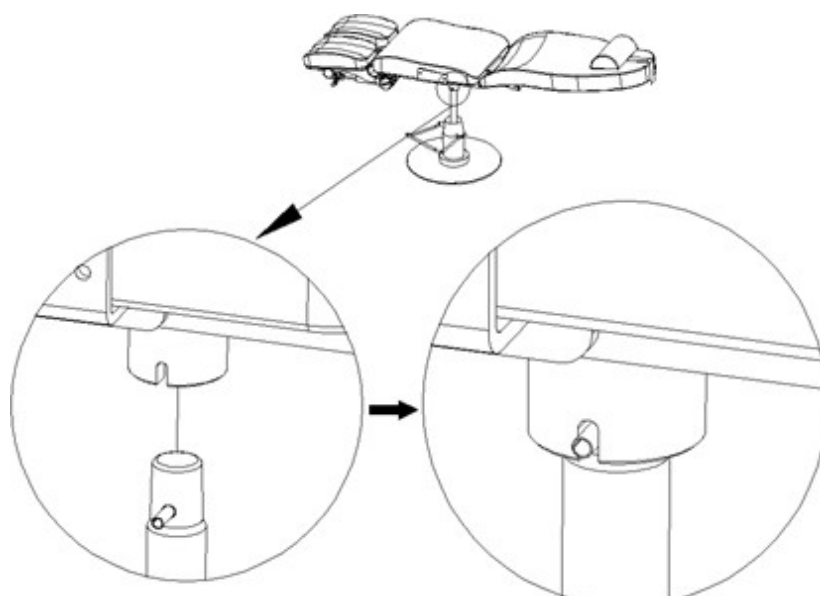

2. Poravnajte palico naslonjala z luknjo gonilnika. Vstavite vijak, kot je prikazano, in ga pritrdite z objemko.

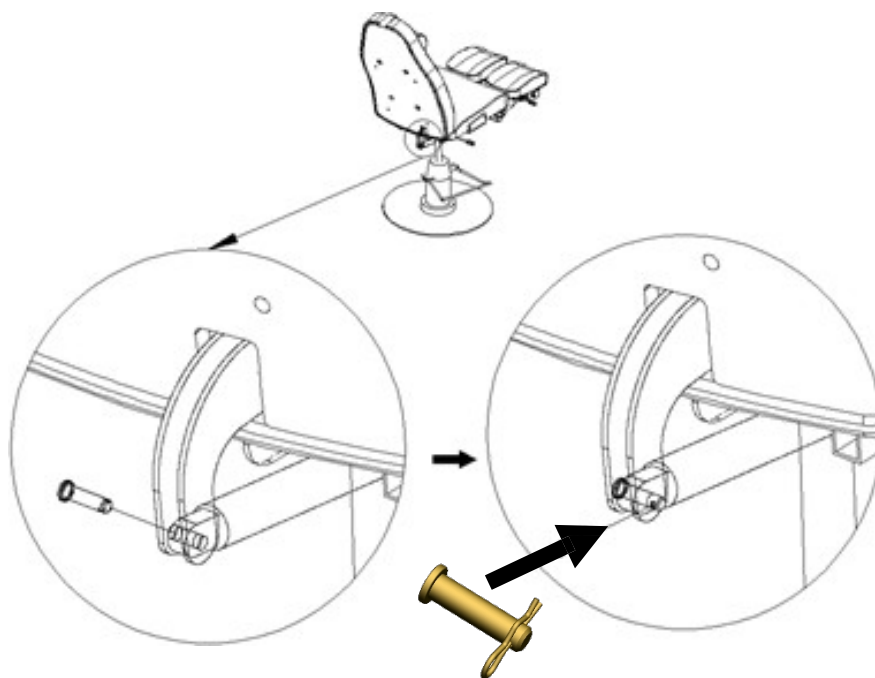


3. Naslonjala za roke pritrdite z vijaki, kot je prikazano na sliki.

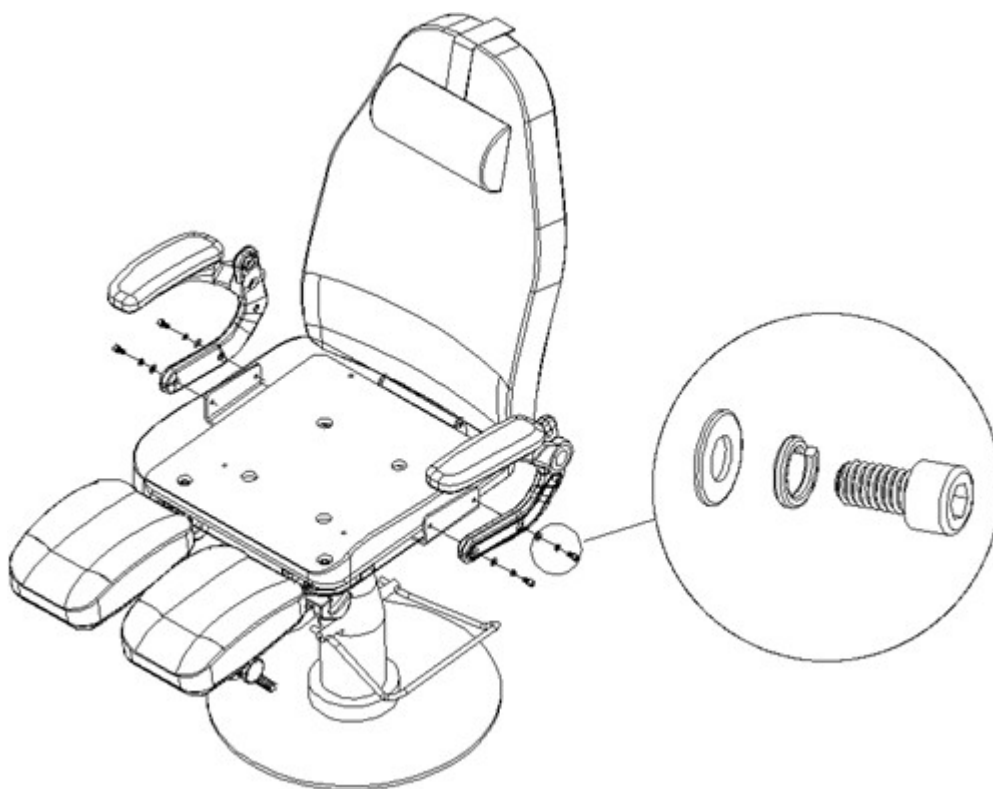


Lastnosti:


1. Višino sedeža lahko nastavite z vzvodom. Dvig vzvoda povzroči blokiranje obračanja sedeža, pritisk na ročico pa zniža sedež.

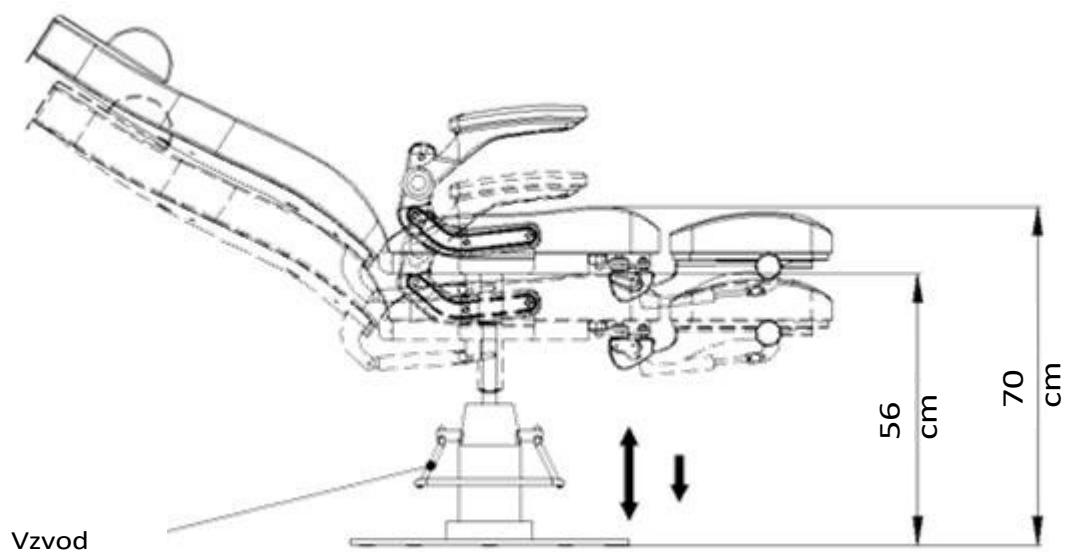

2. Če želite naslonjalo nagniti, pritisnite vzvod in se nagnite nazaj, naslonjalo pa se bo nagnilo pod ustreznim kotom. Največji naklon naslonjala je 45 stopinj.

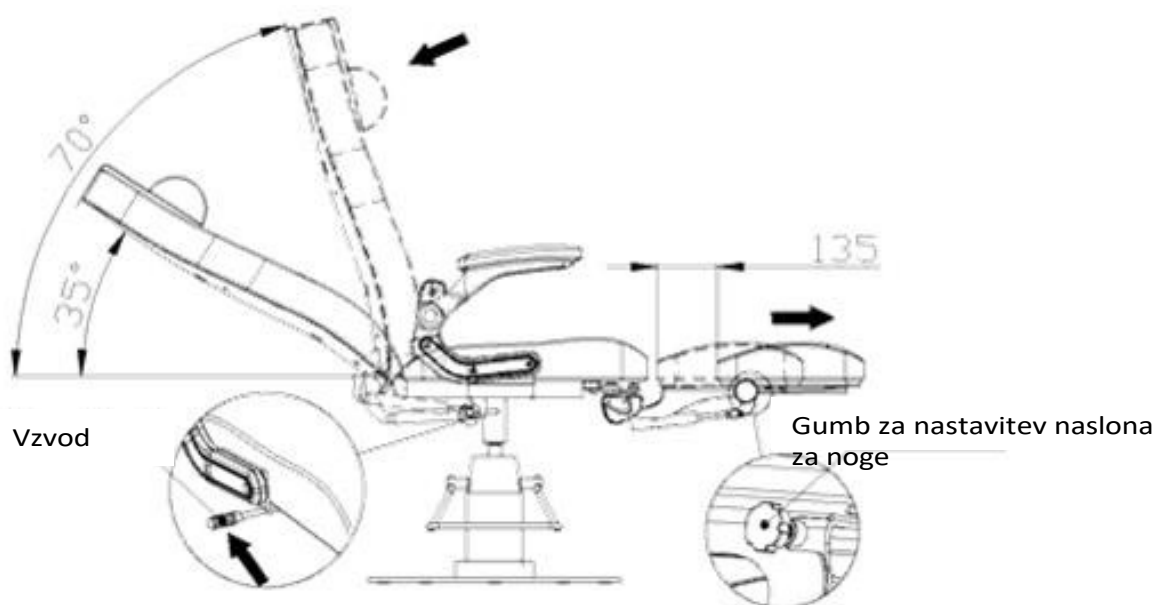

3. Podstavek za noge lahko zaklenete v položaju 30°, 60° ali 90°.

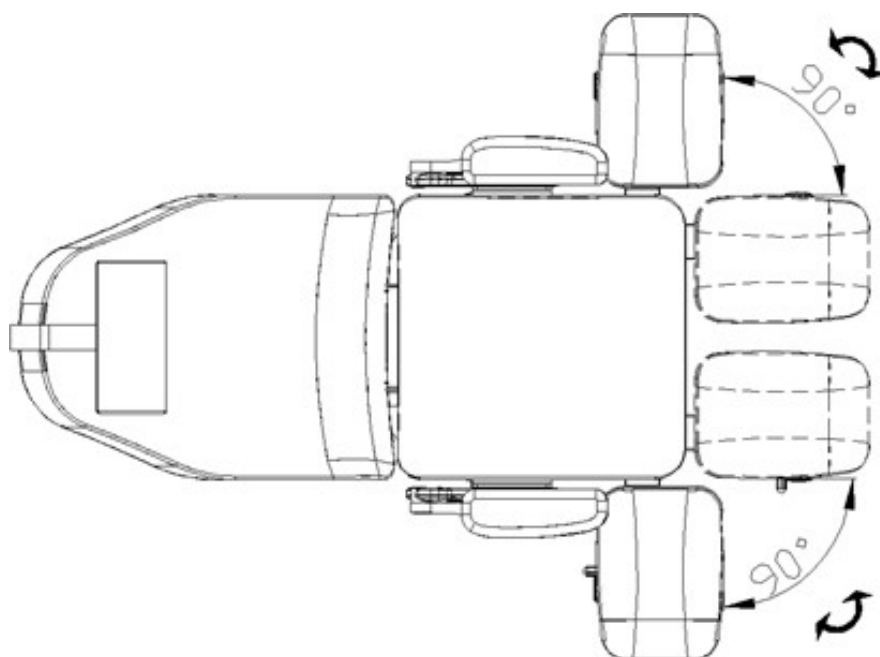

4. a) Z gumbom in hkratnim pritiskom na naslon za noge ga nagnite v želeni kot. Razpon nagiba: do 90°.

(b) Naslonjalo za roke je mogoče nastaviti iz vodoravnega v navpični položaj.



Pozor!

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali v bližini sedeža brez nadzora odraslih.
- Ne polagajte rok ali nog v rege sedeža.
- Stola ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Sedeža ne potiskajte ali vleci po neravnih tleh.
- Ne stojte na stolu.
- Stola ne smejo uporabljati osebe s telesnimi omejitvami, senzoričnimi motnjami ali duševnimi težavami.

Čiščenje in vzdrževanje:

– Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

- Kovinske in plastične površine očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih mestih ali kotih, bo najbolje deloval majhen čopič.
- Za čiščenje enote ne uporabljajte preveč tekočine. Nato enoto razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

- Najboljši čiščenje z blago raztopino detergenta. Amoniak in za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amonijak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tušev, visokotlačnih vodnih topov).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti. Enote ne izpostavljajte pogojem, ki lahko povzročijo onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Vse dejavnosti vzdrževanja in popravil je treba dokumentirati.

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščen osebje.

Tehnični podatki:

- Največja obremenitev 150 kg
- Teža 56,5 kg
- PU/PVC usnje

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če napravo uporablja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne razstavljajte in je ne poskušajte uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščen servisier (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da, da v enoto ne vstopajo tekočine.
4. Takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca lahko enota se poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na pooblaščenega servisierja. storitev - s tem se izognemo tveganjem.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu o k o l j a . Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato

prenos na zbirne točke za elektronske in električne odpadke.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.