

ACTIVESHOP®


NAVODILA ZA UPORABO

Azzurro 708BS električni kozmetični stol 3 motorji



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024


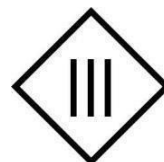


Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in upoštevajte naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili ves embalažni material.
2. Prepričajte se, da sedež deluje brezhibno.
3. Kozmetični stol postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali.
4. Omrežni vtič vtaknite v ustrezno vtičnico.

Opomba! Otroci in neizkušene osebe naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini kozmetičnega stola.

Dimenzije naprave:

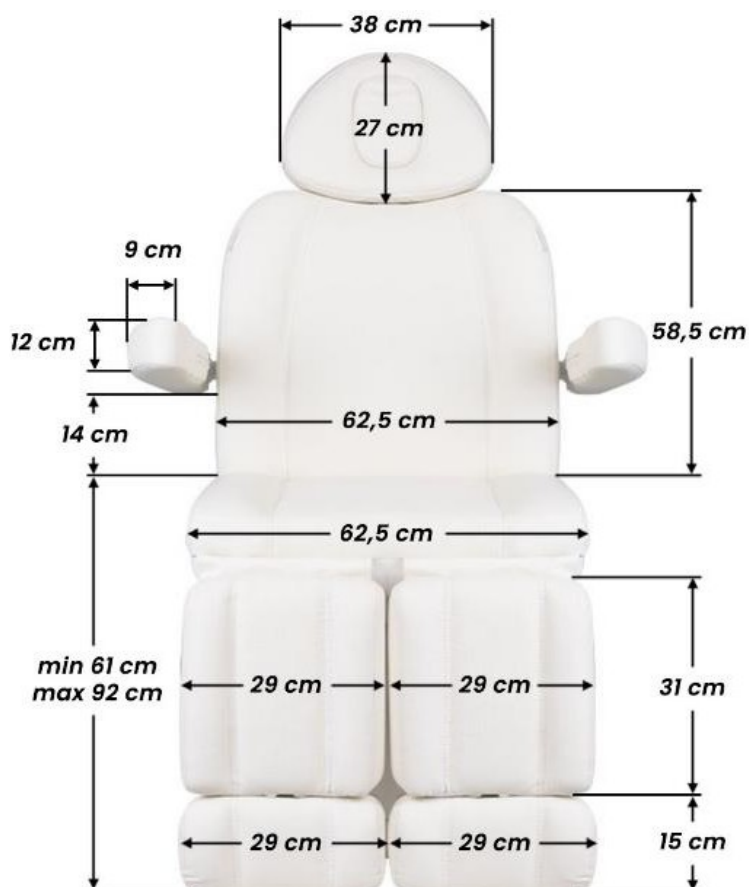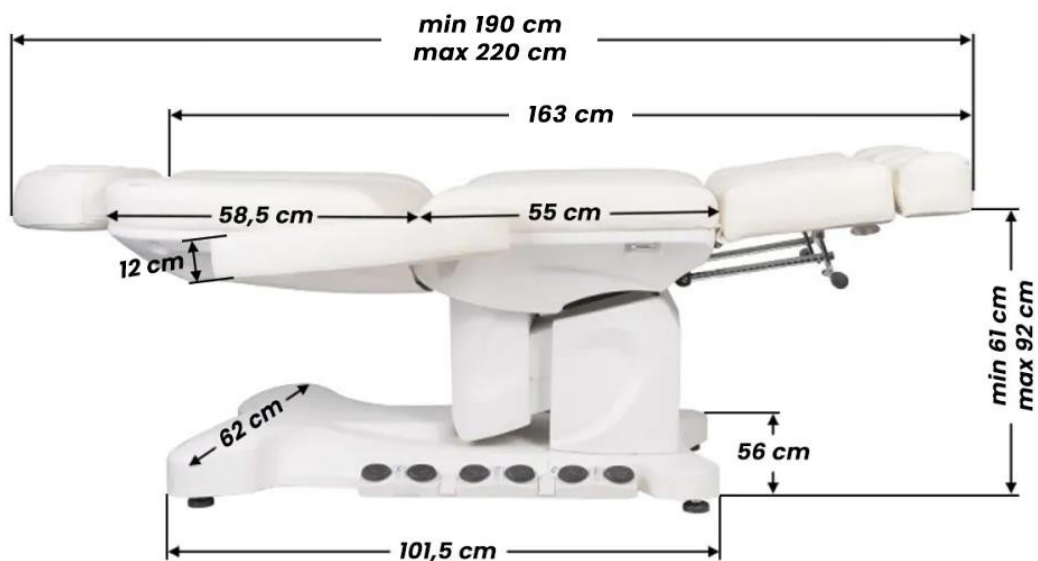


Največja obremenitev sedeža:
200 kg.

Vhodna napetost: 220/240 V,
50/60 Hz

Izhodna napetost: 24V

Konstrukcija naprave:

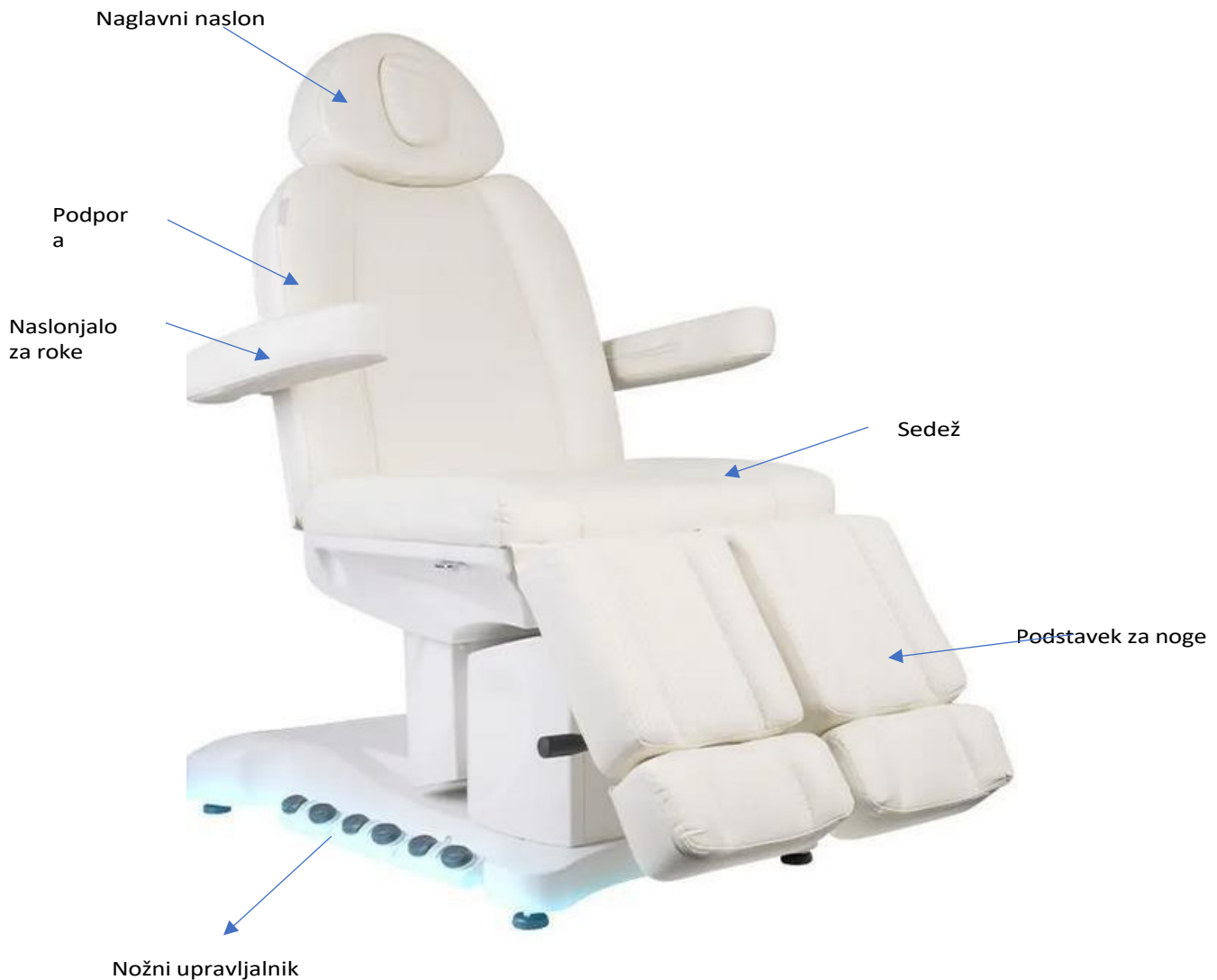

Opozorilo:


1. Podstavek za noge ni zasnovan tako, da bi prenesel celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslonu za roke ali noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

Pozor,

1. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
2. Napajalnega kabla ne privezujte na enoto. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Prepričajte se, da lahko napajalni kabel v nujnih primerih enostavno odstranite.
3. Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
5. Daljinskega upravljalnika ne dovolite upravljati osebi, ki ne izvaja zdravljenja.
6. Pod sedež ne postavljajte nobenih predmetov.

7. Prepričajte se, da je okoli sedeža dovolj prostora, da ga je mogoče prosto zložiti in razložiti.
8. Prepričajte se, da v bližini sedeža ni ostrih ali nevarnih predmetov, ki bi lahko poškodovali napravo.
9. Naprave ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščen servisni center.

Funkcije daljinskega upravljalnika

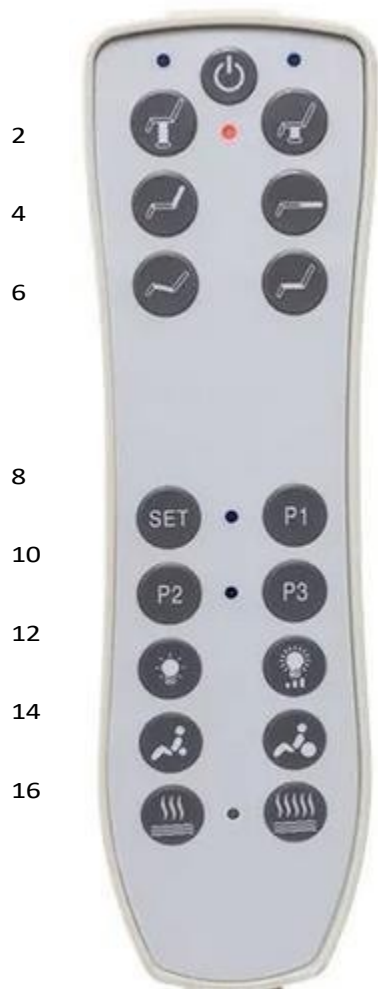

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 - stikalo za vklop/izklop

2.3 - Nastavitev višine 4.5 -

Nastavitev naslona

6.7 - Nastavitev sedeža

8.Press za nastavitev samodejnega načina

9-11. V samodejnem načinu lahko nastavite in shranite višino sedeža, položaj sedeža, naslonjala za hrbet in naslonjala za noge.

Po potrebi prilagodite nastavitve sedeža, nato pritisnite in držite gumb SET, dokler se ne prižge modra lučka, nato pa pritisnite gumb P1, da si zapomnite nastavitve. Z gumbi P1, P2 in P3 si lahko zapomnite 3 različne nastavitve (9-11).

12. Pritisnite , da označite napravo

13. Upravljanje svetlosti svetlobe

14. Funkcija napihovanja naslonjala za hrbet - pritisnite , da deaktivirate napihovanje


15. Funkcija črpanje nasloni za hrbet - pritisnite, na . aktivirate napihovanje

16. Funkcija ogrevanja - pritisnite za izklop ogrevanja

17. Funkcija ogrevanja - pritisnite , da aktivirate ogrevanje


Funkcije nožnega upravljalnika:

Naprava ima 3 pedala za upravljanje z nogo. Vsak je odgovoren za drugo funkcijo.

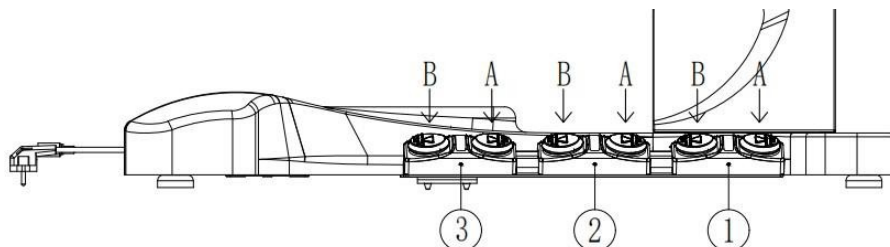


Nastavitev višine

Vklopite stikalo za napajanje.  Nato na pedalu 1 pritisnite , da nastavite višino sedeža.

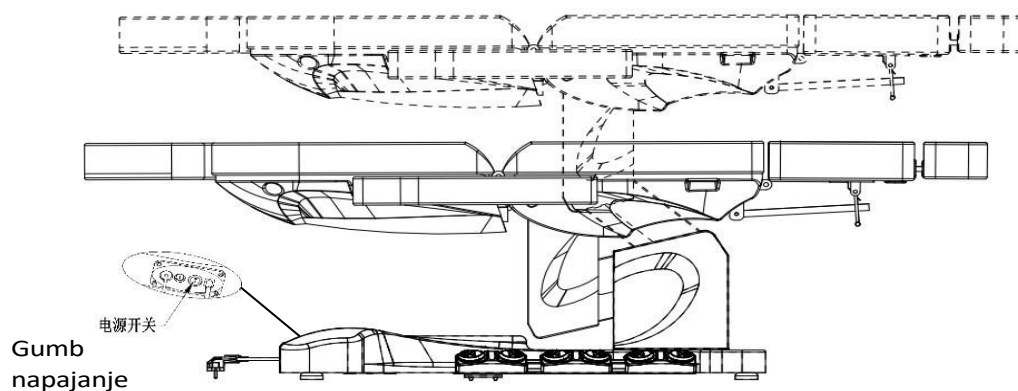


Nastavitev naslona za hrbet

 Na pedalu 2 pritisnite , da nastavite položaj naslonjala.

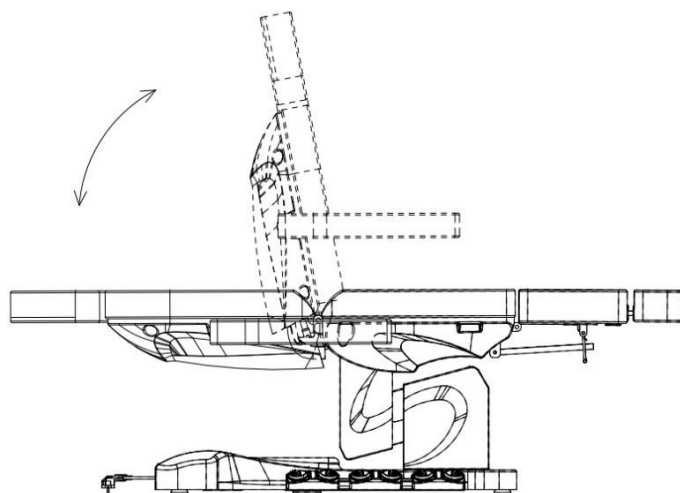


Nastavitev sedeža

 Na pedalu 3 pritisnite , da prilagodite položaj in nagib sedeža.

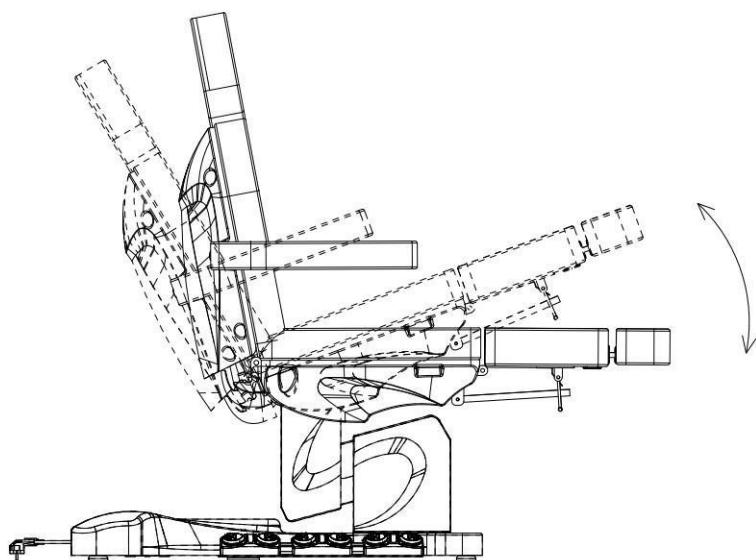



Nastavitev podnožja

Podstavek za noge je nastavljen z vzvodom pod sedežem. Zgrabite vzvod in nagnite naslon za noge v želeni položaj. Vsak naslon za noge je nastavljen posebej.

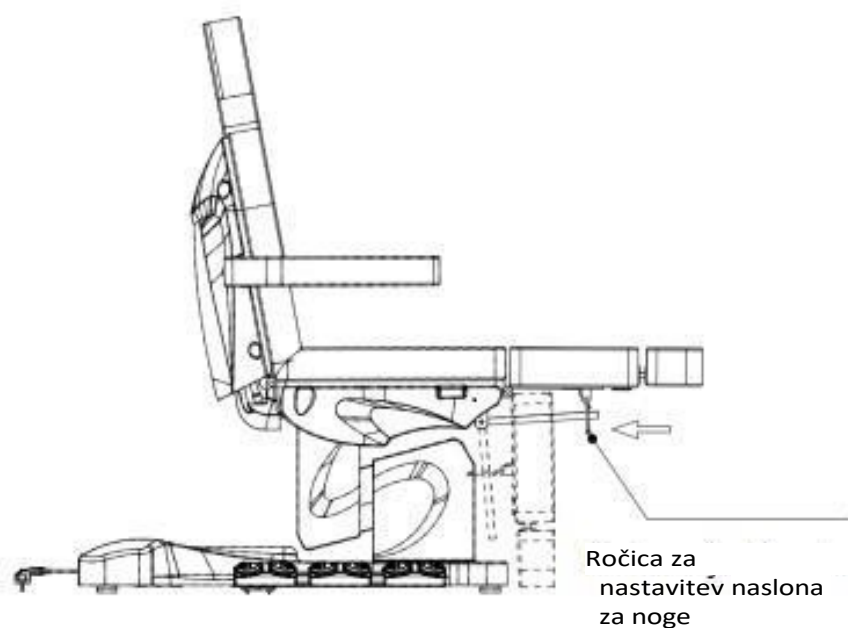

Podaljšek za noge

Stol ima tudi možnost podaljšanja naslona za noge, kar olajša zdravljenje višjih oseb in izboljša udobje. Podnožje se nastavlja z gumbom na spodnji strani podnožja. Če gumb odvijete, lahko podnožje podaljšate.

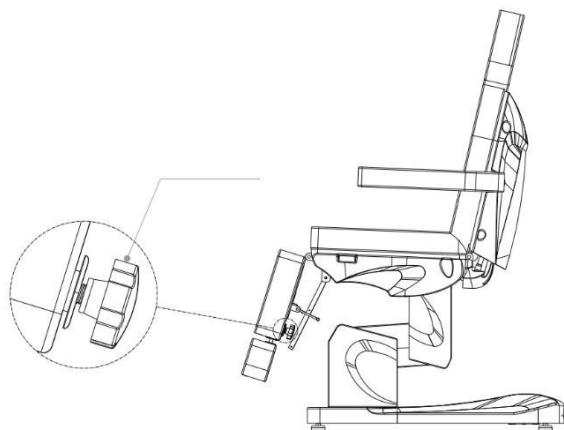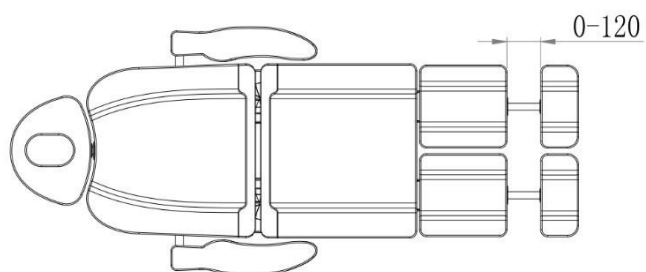


Namestitev naslona za roke:

Naslonjalo za roke potisnite v odprtino na strani naslonjala. Naslon za roko mora biti varno pritrjen. Zavrtite ga v desno ali levo, da se pravilno namesti. Enako storite z drugim naslonom za roke. Naslon za roko je pravokoten na tla (ne glede na naklon sedeža). Lahko ga obrnete za 180°.

Namestitev naslona za glavo:

Naglavni naslon potisnite v odprtino na vrhu naslona sedeža. Ko je naslon za glavo v pravilni višini, zategnite ročico na naslonjalu, da se naslon za glavo pritrdi.

Če želite naslonjalo za glavo spustiti ali podaljšati, odvijte ročico, nastavite naslonjalo za glavo in zategnite ročico.

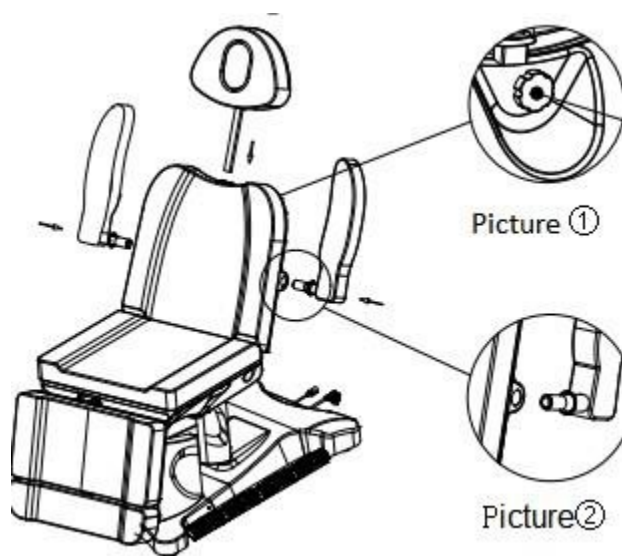

Čiščenje in razkuževanje enote:

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Priporočljivo je, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine

Kovinske in plastične površine ter upravljalne elemente očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtačka. Za čiščenje naprave ne uporabljajte preveč tekočine. Nato napravo razkužite z ustrežno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla

Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Barvane ali kromirane kovinske površine

- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (tušev, visokotlačnih vodnih topov).
- Enote ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter je ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina sedeža

- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja.

1. Popravila naj opravlja izkušeno in od proizvajalca pooblaščen osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščen osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Električnega kozmetičnega stola ali dodatkov ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
4. Vse dejavnosti vzdrževanja in popravil je treba dokumentirati.

Sredstva za preživljanje

Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:

1. Napajalni kabel in njegova pritrditev
2. Ožičenje motorja
3. Krmilna omarica in njeni kabli
4. Ali je dodatna oprema pritrjena
5. Običajno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščen servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščen osebje.

Če je kateri koli del enote poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

Reševanje problemov

Problem	Vzrok	Metode reševanja
Pedal za nožni upravljalnik se ne odziva	1. Buton gumb za vklop se aktivira ali ne aktivira. 2. Preverite, ali je pedal potisnjen do maksimuma. 3. Preverite, ali je aparat priključen na električno omrežje. 4, ali je na spletni strani je bilo vse pravilno povezano.	1. Poskusite znova zagnati gumb za vklop. 2. Poskusite vklopiti druge gumbe in preverite, ali delujejo. 3. Odklopite napravo in jo znova priključite. 4. Odklopite vtiča in jo ponovno povežite.
Naprava oddaja čudne zvoke pri spuščanju sedeža	Ohlapen vijak	Zategnite vijake
Svetilke pedala za nožni upravljalnik se ne prižgejo	Pregorela varovalka	Zamenjajte varovalko

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.

2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.

4. V naslednjih primerih takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis družbe ACTIVESHOP Ltd:

a) je v napravo prišla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,

c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če enota pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter osebe, ki nimajo izkušenj in ne poznajo opreme,

ali je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjne odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba odpadno električno

opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.